



NEW CURING LIGHT

C01-C C01-D C02-C C02-D



C01

従来の使いやすさはそのままに、4秒照射を実現！

2タイプの展開で、C01-D(デュアル)は青と紫の波長域を有し、さまざまな光重合材料に対応します。


NEW
CURING
LIGHT

クラシック


C01-C

波長範囲：440-480nm
光量：1,500nW/cm²
モード：4種類

5 TURBOモードで
秒照射!!

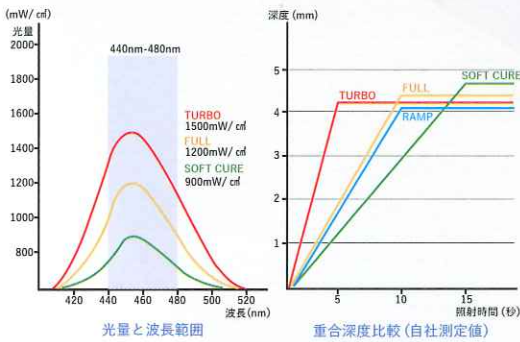

口腔内にスムーズに挿入でき、特に舌側面への照射に適しています。

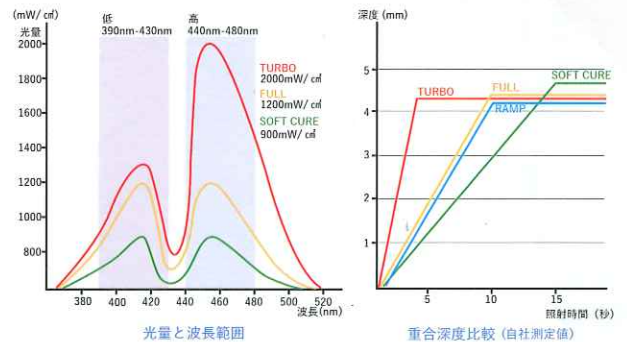

NEW
CURING
LIGHT

デュアル

C01-D

波長範囲：390-430/440-480nm
光量：2,500nW/cm²
モード：7種類

4 TURBOモードで
秒照射!!



C02

より薄く進化したライトヘッドが、臼歯部への照射をサポートします!

C02-D(デュアル)は3秒照射に加え、青と紫の波長域を有し、さまざまな光重合材料に対応します。新色2色を加えて、全12カラーのラインナップです。




NEW
CURING
LIGHT

クラシック


C02-C

波長範囲: 440-480nm
光量: 1,500mW/cm²
モード: 4種類

5 TURBOモードで
秒照射!!

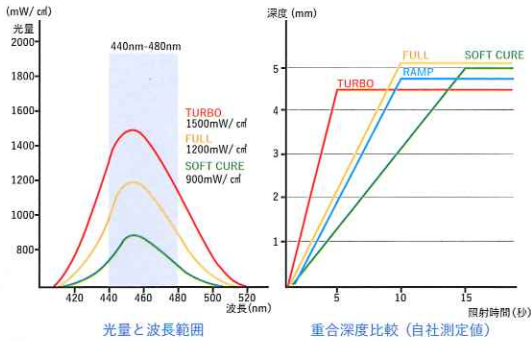

90°の照射角度は少ない開口で遠心部への照射が可能です。

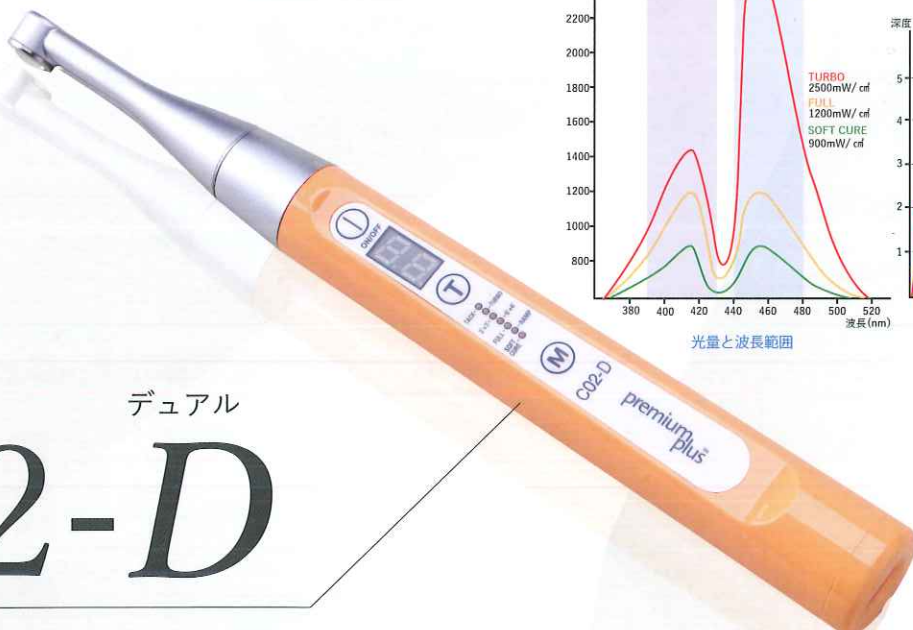


NEW
CURING
LIGHT

デュアル

C02-D

波長範囲: 390-430/440-480nm
光量: 2,500mW/cm²
モード: 7種類

3 TURBOモードで
秒照射!!

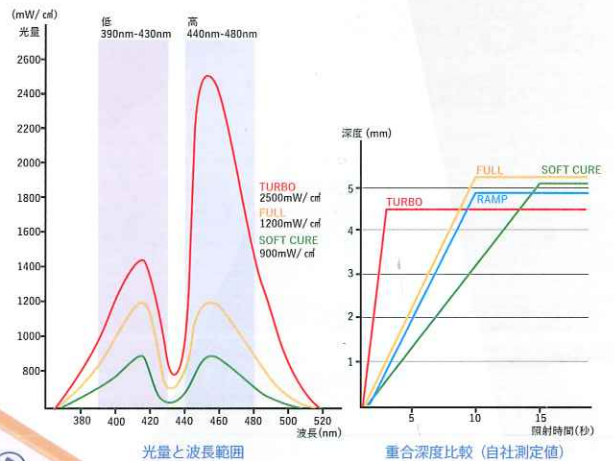

大好評だったキュアリングライトが パワーアップして新登場！

C01、C02がそれぞれクラシック・デュアルの2種類展開となり

「C01デュアルは4秒照射」「C02デュアルは3秒照射」を実現しました。

デュアルは低い紫の波長域までカバーし、様々な光重合材料に反応します。

クラシックは一般的な440～480nm(青色)の波長域のみで、

C01-C、C02-C共に5秒照射となります。



360°回転可能

ヘッドを回転させることで、
上歯・下歯共に容易に照射できます。

あらゆる
咬合面・側面

C01

直径 11mm



C01-D (デュアル)

直径 8mm



C01-C (クラシック)

照射時間モード 照射時間切替は「TIME」ボタン0.5秒押します。



- 自社設計・自社工場での徹底した品質管理を行っております
- 咬合面・舌側面に適した照射角度と、光量は最大2,500mW/cm²のLED光重合器
- 12色展開のカラーバリエーションで簡単操作、持ち運びにも優れています
- バッテリー交換が簡単にできます



ライトヘッドの厚みが約30%薄くなりました(当社比)。
NEWC02は、光が拡散しにくい設計になっています。

C02

角度から ヘアプローチ



360°回転可能

ヘッドを回転させることで、
上歯・下歯共に容易に照射できます。

照射モード

モード切替は「MODE」
ボタンを0.5秒押します。

名称	モード設定
TACK (デュアルのみ)	仮照射に使用できます。 接着性レジンセメントなどの余剰セメント除去に便利です。
TURBO	最も速く硬化させることができるモードです。 光量は C02-D(2,500mW/cm ² (3秒)), C01-D(2,000mW/cm ² (4秒)), C01-C/C02-C(1,500mW/cm ² (5秒)) となります。
3'+3' (デュアルのみ)	メタルブラケットの接着に適しています。 近心、遠心それぞれ3秒間照射し、照射の間は1秒間消えます。
6'+6' (デュアルのみ)	メタルブラケットやバカルチューブの接着に適しています。 近心、遠心それぞれ6秒間照射し、照射の間は1秒間消えます。
FULL	光量 1,200mW/cm ² の照射モードです。
RAMP	5秒間で光量 1,200mW/cm ² まで上昇し、その後は光量をキープします。
SOFT CURE	5秒間で 900mW/cm ² まで上昇し、その後は光量をキープします。 熱さに敏感な患者様に適しています。



簡単測定

照射器の光量をいつでも確認できます。
(表示の数値×100が光量となります)



簡単充電

置くだけで充電可能です。



簡単交換

バッテリーは抜くだけで交換可能です。

スペック比較

製品画像				
製品名	C01-C(クラシック)	C01-D(デュアル)	C02-C(クラシック)	C02-D(デュアル)
照射時間 (ターボモード使用)	5秒	4秒	5秒	3秒
最大光量	1,500mW/cm ²	2,000mW/cm ²	1,500mW/cm ²	2,500mW/cm ²
波長域	440~480nm(青色)	440~480nm(青色) 390~430nm(紫色)	440~480nm(青色)	440~480nm(青色) 390~430nm(紫色)
モード数	4	7	4	7
ヘッド形状				
価格	39,000円	69,000円	49,000円	79,000円

※デュアルは紫色の波長域までカバーすることで、様々な光重合材料を硬化させることができます。(硬化時間等は材料の添付文書をご確認ください。)
※重合深度は4mmです。(自社測定値)

キュアリングライトに装着可能なアライナー矯正用のEZアタッチメント。

圧接することで余剰レジンのバリが減り、アタッチメント装着の効率を大幅に向上させます。

アシスタントも不要になるため、一人でアタッチメントの設置が行えます。



照射エリアを集中させ硬化範囲を制限させます。



C02-C(クラシック)
C02-D(デュアル)

EZアタッチメント

ディスプレイ

減菌済

※スリーブの上から装着ください。

商品コード	サイズ	カラー	入数	価格
C02-PEZA-50	φ10×H10mm	ネイビー	50個	13,500円
C02-PEZA-10			10個	3,000円

対応機種 NEWキュアリングライト C02-C(クラシック)、NEWキュアリングライト C02-D(デュアル)、NEWキュアリングライト C01-D(デュアル)、キュアリングライト C02(販売終了)



補助不要のアタッチメント接着

QRコードを読み込むと動画をご覧いただけます。

安心のメーカー1年保証付き



セット内容

- ・バッテリー・充電スタンド・ACアダプター
- ・123S ペン型キュアリング ライトスリーブ(C01-C)
- ・123L ペン型キュアリング ライトスリーブ(C01-D)
- ・キュアリングライトプロテクティブ ライトシールド × 1
- ・取扱説明書・保証書



仕様

- 電源：入力 AC100-240V,50/60Hz 出力 DC5V/1A
- バッテリー：3.6V 2,600mAh 種類：リチウムイオン
- バッテリー充電時間：2時間（フル充電の場合、20秒モードで約100回照射できます。）
- 本体サイズφ27×264mm ■本体重さ：207g
- ライトガイド：8mm(C01-C) 11mm(C01-D) ■充電スタンドサイズ：90×102mm
- 充電スタンド重さ：192g ■自動電源OFF機能：60秒

NEWキュアリングライトC01-Cクラシック

商品コード **C01-C** セット価格 39,000円

■本体サイズ：φ27×264mm ■ライトヘッド：φ8mm ■入数：1セット
販売名：キュアリングライトC01-C 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268000047

NEWキュアリングライトC01-Dデュアル

商品コード **C01-D** セット価格 69,000円

■本体サイズ：φ27×264mm ■ライトヘッド：φ11mm ■入数：1セット
販売名：キュアリングライトC01-D 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268000048

NEWキュアリングライトC01-Cクラシックライトガイド

商品コード **C01-C-1** 価格：**6,000円** 新品より ■サイズ：φ8mm ■入数：1本

NEWキュアリングライトC01-Dデュアルライトガイド

商品コード **C01-D-1** 価格：**15,000円** 新品より ■サイズ：φ11mm ■入数：1本

カラーは12色からお選びいただけます。

NEW COLOR ●ピンク ●オレンジ ●イエロー ●ライトグリーン ●グリーン ●ライム ●ライトブルー ●ブルー ●ラベンダー ●ライトラベンダー ○ホワイト ●ブラック



セット内容

- ・バッテリー・充電スタンド・ACアダプター
- ・125 口腔内カメラ / ペン型キュアリング ライトスリーブ
- ・キュアリングライト プロテクティブ ライトシールド × 1
- ・取扱説明書・保証書



仕様

- 電源：入力 AC100-240V,50/60Hz 出力 DC5V/1A
- バッテリー：3.6V 2,600mAh 種類：リチウムイオン
- バッテリー充電時間：2時間（フル充電の場合、20秒モードで約100回照射できます。）
- 本体サイズφ27×257mm(C02-C) φ27×253mm(C02-D)
- 本体重さ：187g(C02-C) 174g(C02-D)
- ライトガイド：10mm ■充電スタンドサイズ：90×102mm
- 充電スタンド重さ：192g ■自動電源OFF機能：60秒

NEWキュアリングライトC02-Cクラシック

商品コード **C02-C** セット価格 49,000円

■本体サイズ：φ27×257mm ■ライトヘッド：φ10mm ■入数：1セット
販売名：キュアリングライトC02-C 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268000049

NEWキュアリングライトC02-Dデュアル

商品コード **C02-D** セット価格 79,000円

■本体サイズ：φ27×253mm ■ライトヘッド：φ10mm ■入数：1セット
販売名：キュアリングライトC02-D 一般医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号：27B2X00268000050

NEWキュアリングライトC02-Cクラシックライトヘッド

商品コード **C02-C-1** 価格：**15,000円** ■サイズ：φ10mm ■入数：1本

NEWキュアリングライトC02-Dデュアルライトヘッド

商品コード **C02-D-1** 価格：**25,000円** ■サイズ：φ10mm ■入数：1本

カラーは12色からお選びいただけます。

NEW COLOR ●ピンク ●オレンジ ●イエロー ●ライトグリーン ●グリーン ●ライム ●ライトブルー ●ブルー ●ラベンダー ●ライトラベンダー ○ホワイト ●ブラック

EZアタッチメントがセットになったスペシャルセット

NEWキュアリングライトC02 EZアタッチメントスターターキット

ディスポーザブル 滅菌済

商品コード **FL-0102** セット価格 58,000円

1セット(EZアタッチメント 50個入り+キュアリングライトC02-C)
販売名：キュアリングライトC02-C 一般医療機器 特定保守管理医療機器
届出番号：27B2X00268000049

商品コード **FL-0103** セット価格 88,000円

1セット(EZアタッチメント 50個入り+キュアリングライトC02-D)
販売名：キュアリングライトC02-D 一般医療機器 特定保守管理医療機器
届出番号：27B2X00268000050

セット内容

- ・EZアタッチメント × 50
- ・キュアリングライト C02-CまたはC02-D
- ・キュアリングライトプロテクティブ ライトシールド × 1
- ・125 口腔内カメラ / ペン型キュアリングライトスリーブ × 100
- ・バッテリー・充電スタンド・ACアダプター・取扱説明書・保証書
- ※EZアタッチメントはスリーブの上から装着ください。

カラーは12色からお選びいただけます。

●ピンク ●オレンジ ●イエロー ●ライトグリーン ●グリーン ●ライム ●ライトブルー ●ブルー ●ラベンダー ●ライトラベンダー ○ホワイト ●ブラック

NEWキュアリングライト
交換用バッテリー



商品コード **C01/2-1**

価格：**8,000円**

■種類：リチウムイオン
■入数：1本

カラーは12色からお選びいただけます。

バッテリーはC01-C/D、C02-C/D
各種共通となります

premiumTM
plus JAPAN



Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラス ジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F
〈お問合せ窓口〉 072-735-7101 9:00 ~ 17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター : 〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。

※製品のデザイン、仕様、外観、パッケージ、価格は予告なく変更する場合がございます。

担当販売店