

BELVITA

ベルヴィータ

Global Standard Unit

BELVITA

ベルヴィータ

「より美しく、健康的に生きるために」

"Fusion Shape"をテーマに、術者が求める形態・機能と、患者さんにとっての快適性を追求しました。

次なる時代を感じさせる、
グローバルスタンダードユニットを、
タカラベルモントが世界のドクターへお届けします。





Type.1 オーバーアーム×カンターチェア
※写真はオプションを含みます。

Smooth and Relax

快適性の追求

[Chair]

幅広い年齢層の患者さんに快適な時間をお過ごしいただけるバケット形状のチェアとなっています。
右アームレストは90°/135°回転し、患者さんの着座・退座をさらに優しくサポートします。(オプション)



パワーヘッドレスト **Option**
ハンズフリーで衛生的に操作でき、インスツルメントを持ち直すストレスからも解放されます。



ジョイスティックスイッチ **Option**
パワーヘッドレスト、チェアの昇降やリクライニングを手を使わず足元で操作可能です。



タッチパネル操作に適したハンドル
テーブルデリバリーのしやすさと、タッチパネル
の操作性にも配慮したハンドル形状です。



フレキシブルホルダー
ホルダーの位置は、回転と角度を3軸で自由に調整
でき、任意の位置にホルダーを配置できます。

Low to High

使いやすさへのこだわり

[Holder]

軽い力でフレキシブルに動くバランスアームと、1本ずつ独立したホルダー形状は、立位や座位といった幅広い診療ポジションにも容易に対応します。





ホースガイド
スムーズなガイドローラー動作でハンドピース
ホースの重さを軽減し、長時間の治療でも疲れ
にくい設計になっています。

Release from Weight


スムーズなハンドピース操作

[Place Holder]

ホルダーに視線を移すことなくハンドピースを収めることができます。
ハンドピースが口腔方向に向くデザインがスムーズな治療をサポートします。

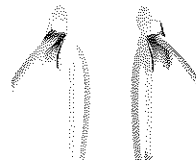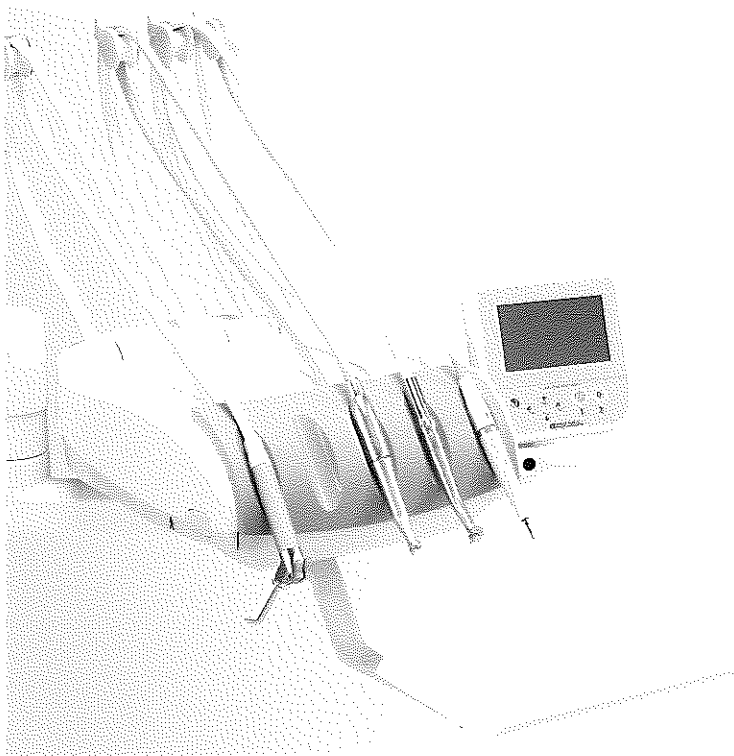

フレキシブルな操作
術者の動きに追従するフレキシブルな操作性を実現し、テーブルの向きに対して角度のあるポジションでも、快適に使用できます。

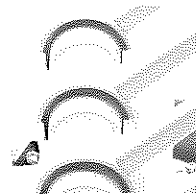


テンションアジャストメント
ロッド部の張力は装着するハンドピースの重さに合わせて調整でき、手首に掛かる負担を軽減します。

Feel Light
Less Fatigue

軽やかにデリバリー

[Rod Holder]

ハンドピースホースの重さをほとんど感じない、手首に優しいホースデリバリー。胸上配置ポジションに適しています。

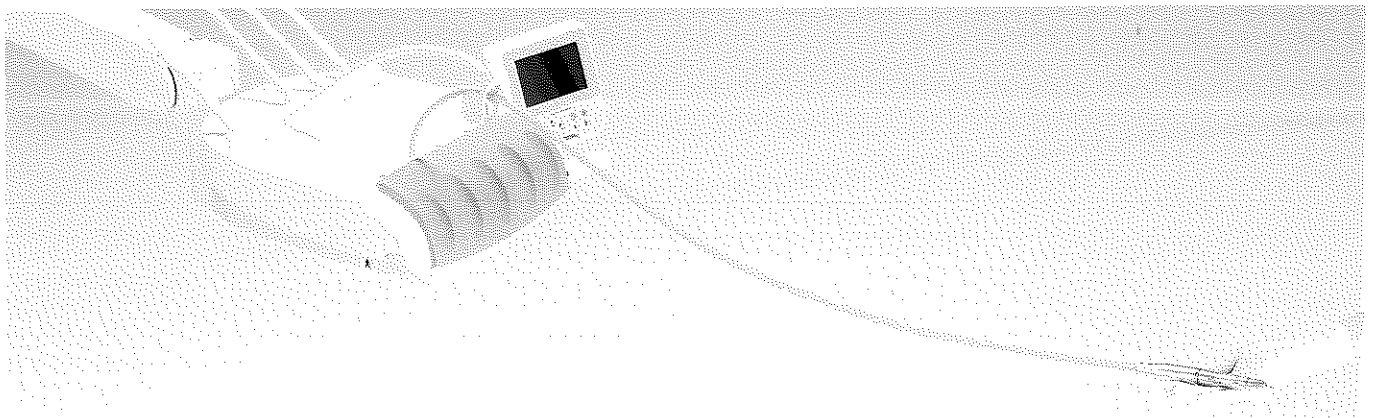

ロングリーチ
900mmロングリーチにも対応することにより、胸上配置ポジションはもろろ幅広い施術スタイルに対応します。



Compact
Space


省スペース設計

[Space]

最小幅1,800mmのスペースでも十分機能を発揮できるコンパクトな設計。よりワークスペースを広く取ることができます。2ハンド診療でも4ハンド診療のどちらでも対応できます。



2ハンド診療
軽い動作と十分なリーチを持つアームが、効率的な2ハンド診療を可能にします。

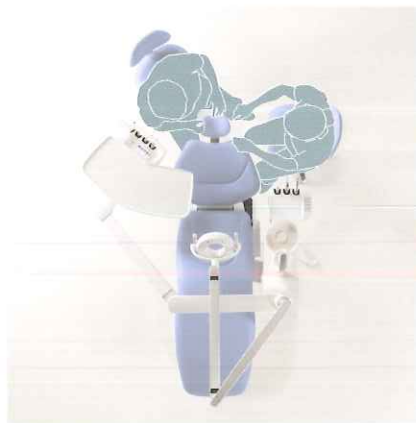

4ハンド診療
大型テーブルトレイ(オプション)はドクターとアシスタントの共有スペースとして使用でき診療をスムーズにします。

Fit your Position

効率的なアシスタントワーク

[Assistant]

トレイによる作業スペースの確保、チェア操作やコップ給水操作が可能なスイッチを備えることで、効率的なアシスタントワークをサポートします。

根管長測定器、う蝕診断器などの診療機器を置けるスペースを確保しました。
(最大荷重1kgfまで)



アシスタントアーム(上下調整機構付き) **Option**
170mmストロークで高さ調整可能なアームにより、2ハンド立位診療でも容易にハンドピースに手が届きます。



ツインバキューム対応 **Option**
大容量バキューム回路と、4本掛けまで対応できるホルダーにより、外科処置などに有用なツインバキュームにも対応。

ユニットの状態を光の色で知らせるインジケータ **Option**

光を使ってユニットの状態を伝えるインジケータを搭載。コップ給水ノズルの一部が特定の色で発光することでユニットの状態をすばやく確認できます。



通常モード

チェアロックモード

メンテナンスモード



回転式スピットンボウル

患者さんの近くまでボウルが回転し、水はねが少なくなることができます。高級感がある陶器製のボウルを採用しています。



Provide Quality

安心と快適の共存

[Cuspidor]

Fusion Shape が織り成す柔らかいラインと、清潔さを感じさせる白を基調としたカラーリングで、患者さんの快適性にも配慮しました。

Touch your Style

直感的な操作が可能

[Interface]


タッチパネルを採用したディスプレイは、ユニットにより操作する全ての機能に直感的なアプローチを可能としました。

チェア操作は診療の効率化を追求し、独立したスイッチにしました。




マイクロモーター

マイクロモーターは、回転数、回転方向、ライトや注水のON/OFFなどの状態を一目で確認でき、設定変更もできます。
メモリー機能は4通りまで設定可能です。

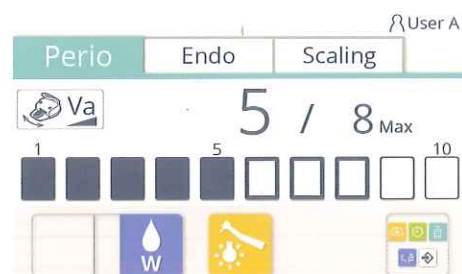

超音波スケーラー

超音波スケーラーは、モード、ライトや注水のON/OFFなどの状態を一目で確認、設定変更可能です。
使用するチップに応じてワンタッチで出力を上限設定することで、効率的な診療をサポートします。

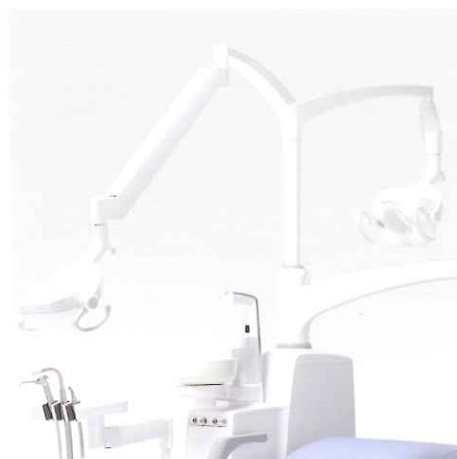

フレキシブルなライト操作
長いアームと軽いヘッド操作により、様々なポジションからの照射も容易です。

Bright Gently

“優しく”照らす

[Light]

3,000~28,000Luxで無段階で調光でき、高い演色性により自然な色を再現します。タッチレスセンサーによりライトの点灯、消灯、レジジンモードの切替ができます。

Precise Control

微細なハンドピースコントロール

[Foot Control]

直感的な操作を可能としたフットペダル。フットコンキャリア、注水ON/OFF切替がコンパクトにまとめられています。オプションで置き場所の自由度が高いワイヤレスタイプもお選びいただけます。



フットペダル操作
横スライドと踏み込みにより、ハンド
ピースの出力調整を足元で細やかに操作
できます。



レンズカバー着脱
レンズカバーはレバー操作で着脱でき、
清掃性と安全性に配慮しています。

ロッドホルダー着脱
ロッドホルダー先端は簡単に分解清掃が
可能となっています。



ホルダー着脱
ドクター、アシスタントのホルダースリーブ
は着脱清掃可能です。

ボウル着脱
陶器製のボウルと排水トラップは着脱可能
です。常にクリーンな状態でお使いいた
だけます。

Improvement of Cleanability


清掃性の追求

[Stay Clean]

スタッフの方にとって、日常の清掃を行いやすい優しさを追求しました。

販売名	一般の名称	医療機器認証番号 / 製造販売届出番号	クラス分類	特定保守	設置管理	製造販売元
ベルヴィータ	歯科用ユニット	230AFBZX00041000	管理	該当	該当	タカラベルmont株式会社
ベルヴィータカウンターチェア	歯科診査・治療用チェア	27B1X00042001044	一般	該当	該当	タカラベルmont株式会社
ステラライトヴィータ	汎用歯科用照明器	27B1X00042002049	一般	非該当	非該当	タカラベルmont株式会社
BT14	歯科用口腔洗浄器	27B1X00042001036	一般	非該当	非該当	タカラベルmont株式会社
エレクトリック マイクロモータ	歯科用電気回転駆動装置	220AFBZX00212000	管理	該当	非該当	ビエン・エ・アジア株式会社
ベルmont DA-290CII	ストレート・ギアードアングルハンドピース	221ALBZX00024000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ
ベルmont DA-290S	ストレート・ギアードアングルハンドピース	220ALBZX00058000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ
エスフォース	歯科用ガス圧式ハンドピース	223ALBZX00042000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ
パリオス 170	歯科用多目的超音波治療器	223ALBZX00036000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ

安全にお使いいただくために

 ◎ご購入前に、設置場所・使用条件・用途をご確認ください。
◎ご使用前のみに添付文書、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

◎製品の仕様・デザインは、予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。
◎写真はカラー印刷のため実物の色とは多少異なる場合があります。
◎実際の製品にはご使用上の注意ラベルが貼付されています。

タカラベルmont株式会社 <http://www.takara-dental.jp>

[大阪本社] 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL(06)6212-3602 [東京本社] 〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-19 TEL(03)3405-6877

札幌 (011)863-2007 盛岡 (019)652-9744 仙台 (022)232-4480 郡山 (024)925-0742 新潟 (025)268-0333 さいたま (048)640-5900 千葉 (043)302-0267
 東京 (03)3405-6877 横浜 (045)681-6241 名古屋 (052)932-6251 金沢 (076)221-8412 京都 (075)241-3425 大阪 (06)6212-3602 神戸 (078)231-6751
 岡山 (086)233-8825 広島 (082)278-2411 徳島 (088)652-1701 福岡 (092)411-2746 鹿児島 (099)226-9481 沖縄 (098)897-6656

総合サービスセンター
(修理および点検受付窓口)

ベルmontコミュニケーションズ(株) コールセンター
TEL(0120)194-222[フリーダイヤル]
FAX(072)344-7985

製造販売元
株式会社ナカニシ 〒322-0075 栃木県鹿沼市下日向700
ビエン・エ・アジア株式会社 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-40-12

BELVITA

ベルヴィータ

[オプション & アクセサリー]



Operating Light



ステラライトヴィータ 【標準】

ISO9680に準拠したLEDライトです。
3,000~28,000Luxで無段階調光で
きます。タッチレススイッチでライトの点
消灯、レジモードを操作できます。
※患者用ミラーはオプションです。

通常点灯時



レジモード



Instruments



LEDライト付マイクロモーター(ブラシタイプ)
MCX 【標準】
MX2
エクسفース DA-820



LEDライト付マイクロモーター(ブラシタイプ)
シーフース DA-291L



電気スケーラー(ライト付・ライト無)
バリオス2
ニュートロン



シリンジ
BT14シリンジ 【標準】
ルザーニ6WAYシリンジ
(ライト付)



カメラホルダーブラケット
ソプロ617、CARE、デンタルのカメラホ
ルダーに対応しています。

Accessories



大型テーブルトレイ (オーバーアームタイプ)

アシスタントとの共有スペースとしても
ご使用いただけます。



大型サブトレイ (ロッドホルダー)

インストゥルメント等の器具をより多く
配膳できます。
(幅400mm×奥行290mm)



パノラマサイズビューアー



ワンタッチガスバーナー (タイマー式)

ワンタッチで点火・消火ができる、連続使
用可能なガスバーナー。



マウストレイ

チェアサイドで、ご自由にマウスをご使用
いただけます。

※読み取り方式によってはご使用いた
だけない場合がございます。

Cuspidor



アシスタントアーム
(上下調整付)

立位時の2ハンド診療でもアプローチしやすい、170mmストロークで高さ調整が可能なアームです。



ツインバキューム

外科処置などに有用なバキューム2本仕様。



サービスカブラー
(水・エア)

水とエアのサービスカブラーを前面に配置、外部機器への給水・給気が容易に行えます。



水・エアクリーンフィルター

多孔質中空糸膜を使用した、歯科用精密ろ過膜フィルター。水回路内の赤サビ、バクテリアの除去やスケールの付着防止。空気回路内の微粒子を除去します。

Chair



パワーヘッドレスト

電動式のヘッドレストです。足元のジョイスティックスイッチで手を使わずヘッドレストを操作できるので、衛生的です。



2関節ヘッドレスト【標準】

手動式のヘッドレストです。可動範囲が広く、さまざまな体型の患者さんに対応します。



アームレスト右

アームレストが回転し、チェアサイドからの乗り降りスムーズに行えます。



ジョイスティックスイッチ

パワーヘッドレスト、チェアの昇降やリクライニングなどを足元で操作できます。手を使わずに操作できるので衛生的です。



チェア操作単体
フットスイッチ

4つのプリセットポジションと昇降やリクライニングの微調整を足元で容易に操作できます。



配管延長用BOX

入替時に、既存配管に対応する延長用のBOXです。

※事前に配管位置の確認が必要です。
弊社営業担当にご相談ください。



液晶モニターブラケット

患者さんへの情報提供や、院内の情報共有に役立つ液晶モニターを搭載することができます。

※液晶モニターは含みません。
21インチ、6kgまで対応。

販売名	一般的名称	医療機器認証番号/製造販売届出番号	クラス分類	特定保守	設置管理	製造販売元
ベルヴィータ	歯科用ユニット	230AFBZX00041000	管理	該当	該当	タカラヘルモント株式会社
ベルヴィータカウンターチェア	歯科診療・治療用チェア	27B1X00042001044	一般	該当	該当	タカラヘルモント株式会社
ステラライトヴィータ	汎用歯科用照明器	27B1X00042002049	一般	非該当	非該当	タカラヘルモント株式会社
エレクトロック マイクロモーター	歯科用電気回転駆動装置	220AFBZX00212000	管理	該当	非該当	ヒエン・エア・アジア株式会社
エックスフォース DA-800(DA-820M)	歯科用電気回転駆動装置	221ALBZX00119A01	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ
エックスフォース DA-800C	ストレート・ギアードアングルハンドピース	219ALBZX00013A02	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ
エックスフォース DA-800S	ストレート・ギアードアングルハンドピース	220ALBZX00060000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ
シーフォース	歯科用電気回転駆動装置	224ALBZX00046000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ
ベルモント DA-290CII	ストレート・ギアードアングルハンドピース	221ALBZX00024000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ
ベルモント DA-290S	ストレート・ギアードアングルハンドピース	220ALBZX00058000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ
パリオス 170	歯科用多目的超音波治療器	223ALBZX00036000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ
ニュートロン モジュールキット	歯科用多目的超音波治療器	224ALBZX00038000	管理	該当	非該当	白水貿易株式会社
BT14	歯科用口腔洗浄器	27B1X00042001036	一般	非該当	非該当	タカラヘルモント株式会社
ルザーニ 6ウェイ シリンジ	歯科用口腔洗浄器	27B1X00042005028	一般	非該当	非該当	タカラヘルモント株式会社

Specifications

● 標準 / ▲ オプション

インストゥルメント	ホルダータイプ	●	カセッター部	センサー式コップ給水(水量検知)	●
	ブレースホルダータイプ	▲		手動回転陶器ボウル	●
	ロッドホルダータイプ	▲		ボウル洗浄(単独・連動タイマー式)	●
	ハンドピース3本掛け(シリンジ含む)	●		水クリーンフィルター	▲
	ハンドピース回路追加(5本まで)	▲		エアークリーンフィルター	▲
	BT14シリンジ	●		オートセ/バレーター(CS1)	▲
	ラディスシリンジ	▲		水用サービスカブラー	▲
	77型シリンジ	▲		エア用サービスカブラー	▲
	ルザーニ6WAYシリンジ(ライト付)	▲		LEDインジケータ	▲
	ライト付マイクロモーター(MCX)	●		アシスタントアーム(上下調整付)	▲
	ライト付マイクロモーター(MX2, DA-291L, DA-820)	●		セントラルバキューム(遅延付)	●
	エアモーター(DA-281)	▲		ツインバキューム	▲
	ニュートロンスケラー	▲		セントラル式排唾	▲
	パリオス2スケラー	▲		BT14シリンジ	●
	ライト付タービン1本仕様	●		ラディスシリンジ	▲
	ライト付タービン2本以上仕様	▲		77型シリンジ	▲
	着脱式ハンドピースホース	●		チェア操作(P1・P2・LP・O)	●
	カメラホルダーブラケット	▲		温水器	●
	ハンドピース温水	▲			
	フラッシュアウト	▲			
コントロール	バランスアームエアブレイクスイッチ(オーバーアーム)	●	チェア部	レザーカー(14色)	●
	スライド式フットコントローラー(水切替スイッチ付)	●		パワーヘッドレスト	▲
	スライド式フットコントローラー(水切替スイッチ付、無線対応)	●		二関節ヘッドレスト	●
	フットコントローラーキャリア	●		アームレスト左	●
		▲		アームレスト右	▲
アクセサリ	パノマサイズビューアー	▲	ジョイスティックスイッチ(最大3本まで)	▲	
	紙コップ汚物入れ	●	チェア操作単体フットスイッチ	▲	
	シリコンマット	●	ジャンクションボックス(内蔵式)	●	
	ディスポークリナーマット	▲	配管延長用BOX	▲	
	大型テーブルトレー(オーバーアームタイプのみ)	▲			
	大型サフトレー(ロッドホルダーのみ)	▲	ワイヤ部	ストレートボール	●
	ワンタッチガスバーナー(ボンベケース付)	▲		ステラライトヴィータ	●
マウストレー	▲	患者用ミラー		▲	
			液晶モニターブラケット	▲	

タカラベルモント株式会社 <http://www.takara-dental.jp>

【大阪本社】〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 TEL(06)6212-3602 【東京本社】〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-19 TEL(03)3405-6877

札幌(011)863-2007 盛岡(019)652-9744 仙台(022)232-4480 郡山(024)925-0742 新潟(025)268-0333 さいたま(048)640-5900 千葉(043)302-0267
 東京(03)3405-6877 横浜(045)681-6241 名古屋(052)932-6251 金沢(076)221-8412 京都(075)241-3425 大阪(06)6212-3602 神戸(078)231-6751
 岡山(086)233-8825 広島(082)278-2411 徳島(088)652-1701 福岡(092)411-2746 鹿児島(099)226-9481 沖縄(098)897-6656

総合サービスセンター
(修理および点検受付窓口)

ベルモントコミュニケーションズ株式会社 コールセンター
TEL(0120)194-222 [フリーダイヤル]
 FAX(072)344-7985

製造販売元

株式会社ナカニシ 〒322-0075 栃木県鹿沼市下日向700
 ビエン・エア・アジア株式会社 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-40-12
 白水貿易株式会社 〒532-0033 大阪市淀川区新高1-1-15