

メディコム 滅菌ロール


オートクレーブ/EOガス用インジケータ付き

ボックス入り



メディコム 滅菌ロールの特長

- オートクレーブ・EOガス両用に対応した滅菌ロールです。
- 長さや大きさにあわせてカット出来るので、フレキシブルに使用できます。
- 専用ディスペンサー不要のボックス入りタイプです。
- 滅菌状態を一目で確認できる便利なインジケータ付き。

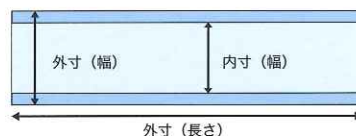

(内寸・外寸とも数ミリの誤差がございます)

インジケータの色調変化

EOガス滅菌

オートクレーブ滅菌

滅菌前

滅菌後


滅菌前

滅菌後



※インジケータは化学的インジケータであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程にさらされたか否かを区別するもので、被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。

スムーズな開封性 紙剥け・フィルム裂けを抑え、安全且つ衛生的です。

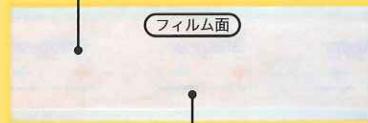

滅菌状態を一目で確認可能 内容物を確認できる透明フィルムを採用

品番	外寸(幅×長さ)	内寸(幅)	入り数	JANコード	参考医院価格
8862-9510	幅50mm×長さ200m	30mm	1ケース/6ロール	4897008630836	¥2,500/ロール
8862-9520	幅75mm×長さ200m	55mm	1ケース/4ロール	4897008630843	¥3,500/ロール
8862-9530	幅100mm×長さ200m	80mm	1ケース/3ロール	4897008630850	¥4,500/ロール
8862-9540	幅150mm×長さ200m	130mm	1ケース/2ロール	4897008630867	¥6,500/ロール
8862-9550	幅200mm×長さ200m	180mm	1ケース/4ロール	4897008631772	¥10,300/ロール
8862-9560	幅250mm×長さ200m	230mm	1ケース/4ロール	4897008631789	¥13,400/ロール
8862-9570	幅300mm×長さ200m	280mm	1ケース/2ロール	4897008631796	¥15,400/ロール
8862-9580	幅350mm×長さ200m	330mm	1ケース/2ロール	4897008631802	¥18,600/ロール

【ご使用上の注意】

●滅菌ロールのご使用は1回限りでお願いします。(再使用はおやめ下さい。) ●保管の際は、水濡れに注意し、酸・アルカリ・殺菌消毒剤・直射日光・紫外線・蛍光灯・高温多湿等を避けて下さい。(滅菌紙の劣化や、インジケータの変色等、滅菌ロールの品質を損なう恐れがあります。) ●乾熱滅菌器ではご使用できません。 ●ケミクレーブ滅菌でのご使用はできません。 ●常温で保管し、滅菌後約6ヶ月以内でのご使用をおすすめします。

RE201312-D

販売代理店

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
 【デンタル事業部】
 〒650-0033 神戸市中央区江戸町96番地ストロングビル8F
 TEL : 078-327-3366 FAX : 078-333-0074
 dental@medicom-japan.com http://www.medicom-japan.com

YAHOO! Google で **メディコムジャパン** と検索ください!