



ヒートシーラー シールツ



Seal 2



シール幅
幅広
はばひろ
12mm

「滅菌パックに関するEN規格」
滅菌シール幅は6mm以上と
規定されています

規格
ISO11607-2
適合

実際のシール幅

幅広
はばひろ
12mm

「シンプル」で「高性能」



12mm



「12mm」のシール幅で
強力にシーリング

「クラスBオートクレーブ」に
おすすめ

操作が
カンタン

洗練されたスタイリッシュな デザイン




壁掛け



分かりやすい操作法



裏面のスイッチを押して、電源を入れます。

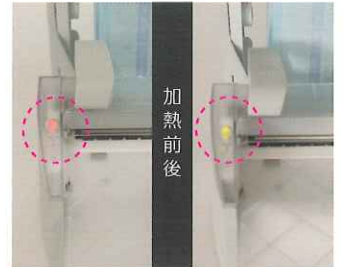

加熱
前後

予熱中は、赤いランプ点滅します。予熱が終了すると、緑のランプが点滅します。



滅菌パックを引き出してレバーを倒します。




緑のランプが点灯してピープ音が鳴ったら、シールが完了です。

設置する場所によって、レイアウトを選ぶ事が可能です



カッターをスライドさせて滅菌パックを切ります。滅菌パックの反対側もシールします。

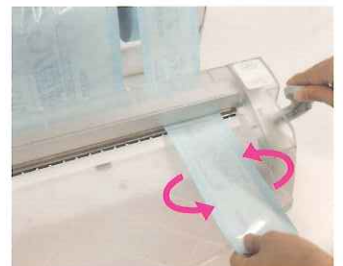

クラスB
EN13060適合

大容量
22L

省スペース
壁面に付けて設置可

お急ぎ
サイクル
15分

リサは減圧乾燥
器具は乾燥して
サイクル完了!

必ず器具を乾燥させてから滅菌してください。
お急ぎサイクルは乾燥しません。

クラスBオートクレーブ
lisa 22ℓ



販売名:クラスBオートクレーブリサ 一般的名称:小型未包装品用高圧蒸気滅菌器
医療機器認証番号:228ALBZX00008000 管理医療機器、特定保守管理医療

Seal2

商品コード 07801100

標準セット価格 ¥120,000

※滅菌パックは含まれておりません

仕様

電源電圧	: 100-120V
最大消費電力	: 100 W
電源	: 50/60Hz
シール幅	: 12x310mm
寸法	: W452xD480xH420mm(平面設置、作業台取付時)
重さ	: 7.1kg

記載価格は2019年2月現在のものです、税別です。



白水貿易株式会社

〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618
 〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
 〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<http://www.hakusui-trading.co.jp/> 2019.4.P.3000 ver.1.2.1