

Nacera® Zirconia Disc

切削加工用セラミックス

ナセラジルコニアディスク

Nacera®



高透光性ジルコニアディスク Nacera® パール マルチシェード



- 3Y-TZPのグラデーションディスク
- 光を透過しすぎないハイトランス(透過率44%)
- 歯頸部から切端までスムーズな色調変化
- 切削性に優れマージン部のチップングやクラックを心配することなく精密なミリングが可能




強度と透光性の両立

Nacera®パールマルチシェードは4点曲げ強さ1200Mpaの高い強度を有しながら光透過率44%と、優れた透光性と強度を併せ持つ審美性に優れたジルコニアディスクです。

シームレスなマルチレイヤー

独自のカラーブレンド法により色調による明度と彩度をジルコニアディスクで取り入れることに成功しました。これにより、自然なグラデーションの再現が可能となっています。

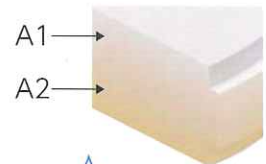

高透光性ジルコニアディスク Nacera® パールシェード



- 3Y-TZPの単色ディスク
- VITAシェードにマッチした16色とホワイトニングシェード
- 自然な透明感に加え高い曲げ強度があるので幅広い症例に対応
- 均一な品質のディスクなので部分的な収縮率の違いがありません
- 切削性に優れマージン部のチップングやクラックを心配することなく精密なミリングが可能



強度と透光性の両立

Nacera®パールマルチシェードは4点曲げ強さ1200Mpaの高い強度を有しながら光透過率44%と、優れた透光性と強度を併せ持つ審美性に優れたジルコニアディスクです。

ホワイトを加え全9色のバリエーション

Nacera®パールシェードは、コーピングフレーム用のホワイトを含め全9色・計18種類をラインナップし、審美性と強度を追及したジルコニアディスクです。

Nacera®ブルー Xとの コンビネーションでさらなる 審美性を追及



Nacera®ブルー Xとの併用によってトランス色を自在にコントロールすることができ口腔内での調和を更に高めることが出来ます。

**Nacera®パールQ³マルチシェードには
使用できません**

Nacera®パールマルチシェードと
Nacera®パールシェードで使用可能です。

超高透光性ジルコニアディスク

Nacera® パール Q³ マルチシェード




- 6Y-PSZのグラデーションディスク
- VITAシェードにマッチ
- 前、臼歯フルクラウン(3ユニットブリッジ、ベニア、インレー、オンレー)に適用
- グラデーションがスムーズで境目がなくシームレス




一層高まった透光性


Nacera®の技術によって開発された最新のジルコニア生成法「6Y-PSZ」ジルコニアは他のイットリア安定化型ジルコニアと比べて光の複屈折がはるかに低いレベルになっています。これにより、その透光性は天然歯に近い51%を実現することが可能となりました。

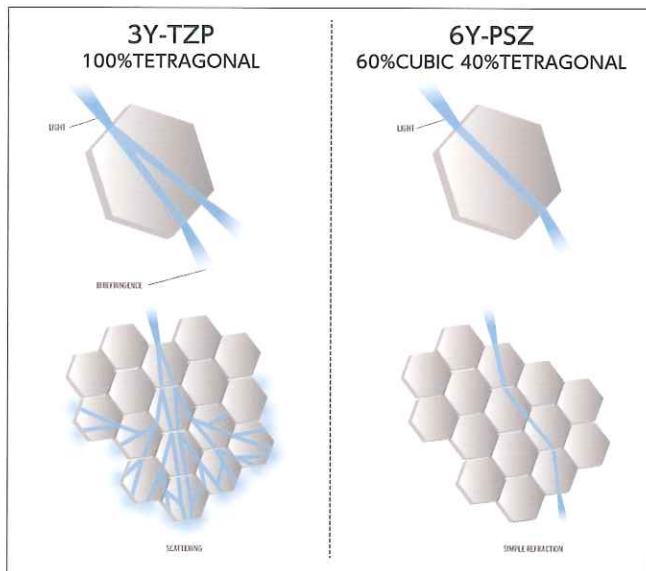

■ 透過率

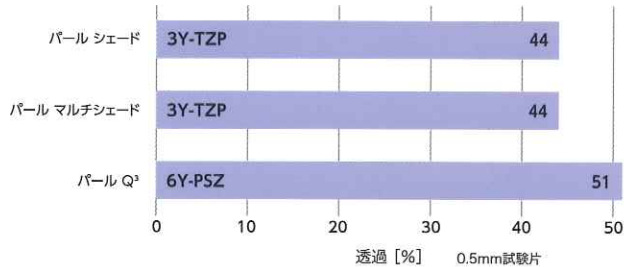

■ 曲げ強さ

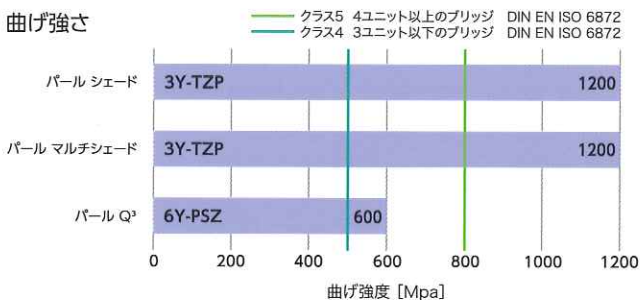


シームレスなマルチレイヤー


独自のカラーブレンド法により色調による明度と彩度をジルコニアディスクで取り入れることに成功しました。これにより、自然なグラデーションの再現が可能となっています。



Nacera® Color Guide

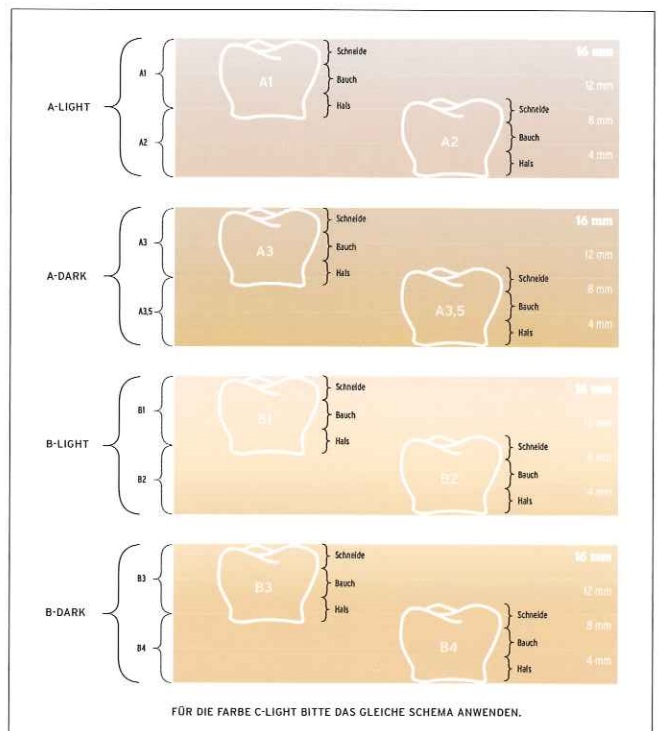

■ 4点曲げ試験

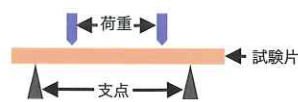



3点曲げ試験と比較して計測は難しいがデータのばらつきが少なく材料の基本的性質を調べるのに適している方法です。3点曲げ試験の数値より約10%~20%強度数値が高くなります。

The Nacera®

Zirconia Concept

A solution to every need

	<p>ハイトランスルーセント (HT)  </p>	<p>ウルトラハイトランスルーセント (UHT)  </p>																				
マルチシェード	<p>Nacera® パール マルチシェード</p>  <p>■ シェード</p> <table border="1"> <tr><td>A-Light</td><td>A-Dark</td></tr> <tr><td>B-Light</td><td>B-Dark</td></tr> <tr><td>C-Light</td><td>C-Dark</td></tr> <tr><td>D-Light</td><td></td></tr> </table> <p>■ 厚み 14mm 18mm 22mm</p> <p> ブルー X 対応品</p>	A-Light	A-Dark	B-Light	B-Dark	C-Light	C-Dark	D-Light		<p>Nacera® パール Q³ マルチシェード</p>  <p>■ シェード</p> <table border="1"> <tr><td>A-Light</td><td>A-Dark</td></tr> <tr><td>B-Light</td><td>B-Dark</td></tr> <tr><td>C-Light</td><td></td></tr> </table> <p>■ 厚み 16mm 20mm</p>	A-Light	A-Dark	B-Light	B-Dark	C-Light							
A-Light	A-Dark																					
B-Light	B-Dark																					
C-Light	C-Dark																					
D-Light																						
A-Light	A-Dark																					
B-Light	B-Dark																					
C-Light																						
単色	<p>Nacera® パールシェード</p>  <p>■ シェード</p> <table border="1"> <tr><td>A1</td><td>A2</td><td>A3</td><td>A3.5</td><td>A4</td></tr> <tr><td>B1</td><td>B2</td><td>B3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>C1</td><td>C2</td><td>C3</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>D2</td><td>D3</td><td>White</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>■ 厚み 14mm 18mm 25mm ※ C1, C2, D3の25mmはありません。</p> <p> ブルー X 対応品</p>	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3			C1	C2	C3			D2	D3	White			<p>医療機器の分類: 管理医療機器 販売名: Naceraセラミックス 認証番号: 228A0BZI000060000 一般名称: 歯科切削加工用セラミックス</p>
A1	A2	A3	A3.5	A4																		
B1	B2	B3																				
C1	C2	C3																				
D2	D3	White																				

Nacera® Tool Selection


 トランス色の向上に



品名	ナセラ ブルー X
内容	ナセラ ブルー X 15g、専用筆、ガラス皿

標準販売価格 ¥25,000

- 医療機器の分類: 管理医療機器
- 販売名: ブルー X
- 認証番号: 301AKBZI00070000
- 一般名称: 歯科セラミックス用着色材料

 シンタリングファーンエスの炉内洗浄に



品名	ナセラクリーン スターターキット
内容	ナセラクリーン200g 1本

標準販売価格 ¥16,600

- 薬事適用外品

 シンタリングファーンエスの温度較正に



品名	ナセラ キャリブレイト
内容	キャリブレーションリング 15個 基準リング 1個 ダイヤルゲージ付アクリルトレイ 1台

標準販売価格 ¥54,000

- 薬事適用外品

 クラックチェックでハイレベルな品質管理を



品名	ナセラ インспекション
内容	ナセラ インспекションリキッド 200ml ディッピングジャー 1個 ツイザー 1本 UVフラッシュライト 1本

標準販売価格 ¥29,900

- 薬事適用外品

選任製造販売業者 **AJMD株式会社**

〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町4-7 TEL.03-5614-0733



販売元

株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町6-35 TEL.06-6773-3333

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東2-24-2 TEL.03-3835-2653

九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂6-24-21 TEL.092-575-6060

<http://www.momose-dm.co.jp/>

お問い合わせは