


# COLOR CODE Gutta Percha Points III



# Gutta Percha Points ACCESSORY III


## 操作性が向上

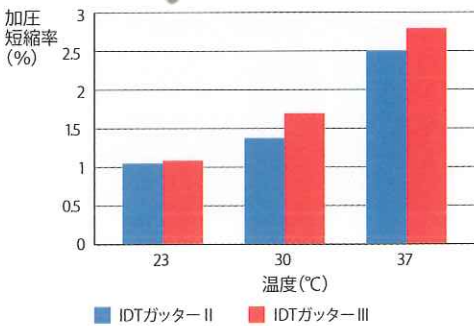

従来品よりも温度に応じた加圧短縮率が向上しており、常温付近では適度なコシを有し、体温に近い温度帯では根管での側方加圧がしやすくなっております。

※製版元試験による


## 折れにくさが向上

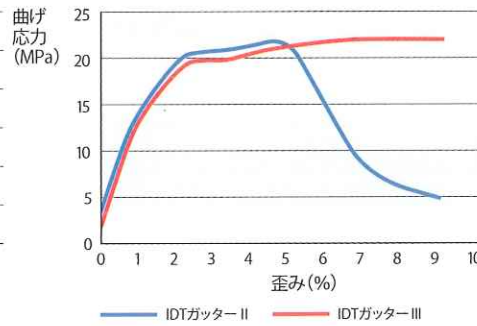

従来品は5%の歪みで亀裂が生じたが、IDTガッターIIIは10%歪んでも亀裂が生じず、折れにくさが向上したため、より差し込みやすくなりました。


※製版元試験による

## 明瞭なX線造影性

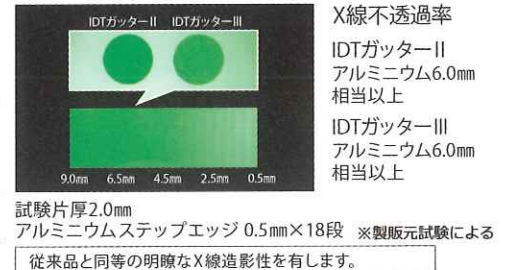

- ◆ IDTガッターパーチャポイントIII  
# 20・25・30・35・40・45  
# 50・55・60・70・80 各120本入
- ◆ IDTアクセサリーポイントIII  
細小・細中・細大  
標小・標中・標大 各120本入  
太小・太中・太大

## IDTガッターパーチャポイントIII

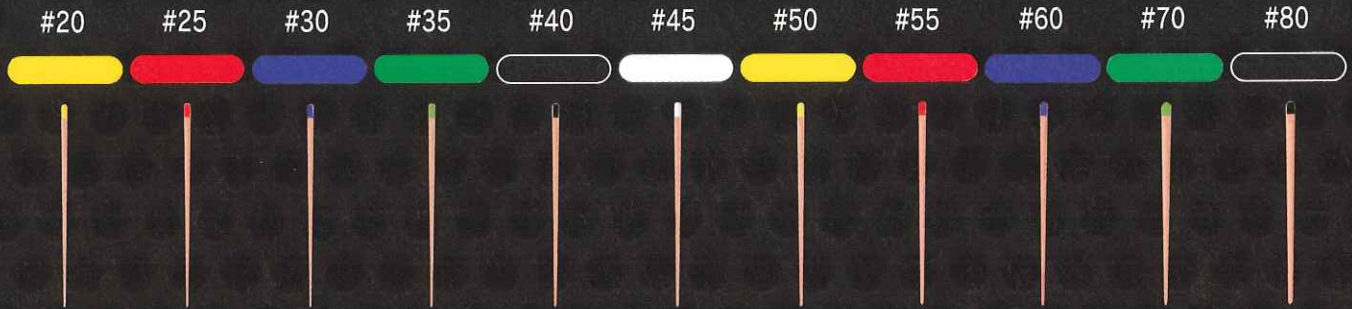

## IDTアクセサリーポイントIII

※サイズは実物と若干異なります



## 内外歯材株式会社

本社 〒543-0062 大阪市天王寺区逢坂2-3-10  
TEL 06-6771-5553 FAX 06-6779-7518  
名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市千種区内山1-2-6  
TEL 052-741-7011 FAX 052-741-7014

# 救急エクスプレス

DENTALFILM社の使用手順ムービー




フィルム・現定液が一体化 50秒で現像OK!

訪問診療のX線診断に

デジタルの故障時に

1箱15枚入

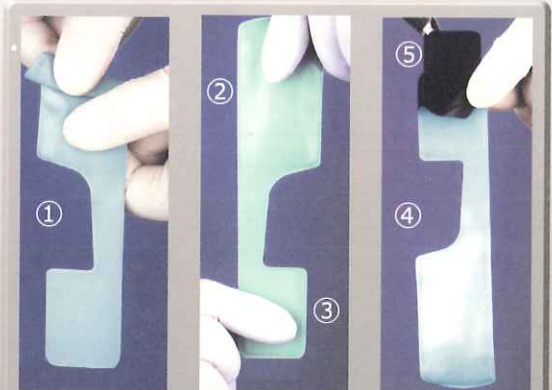

- ①現定液を上フィルムを下に持ち現定液のはしから丸めます。
- ②液が入っている袋の薄膜を破りフィルムのほうへ移動させます。
- ③すぐに指で挟みながらマッサージを50秒間続けます。
- ④フィルムを上に見定液を下へ上下反転して、現定液は元の場所へ戻します。
- ⑤上から包装を開いてフィルムを取り出して水洗いしてください。