

SUNSTAR


Indoor Air Quality

製品名	QAIS -shield- フレーム&シールドセット		
品番	Q SSS1F5		
フレーム素材	ステンレス、エラストマー樹脂		
フィルム素材	トリアセチルセルロース (TAC) フィルム		
同梱品	フレーム1個、アイシールド2枚 (ルーベ用とライト付きルーベ用)、マウスシールド1枚		
サイズ (mm)	外装箱	W290×D380×H320	
	梱包箱	W270×D180×H60	
	フレーム	W148×D190×H55	
	フィルム	アイシールド W256×H110 マウスシールド W256×H115	

製品名	QAIS -shield- 交換用アイシールド <ルーベ用>	QAIS -shield- 交換用アイシールド <ライト付きルーベ用>	QAIS -shield- 交換用マウス シールド
品番	Q SESL20	Q SESLL20	Q SMS20
フィルム素材	トリアセチルセルロース (TAC) フィルム		
同梱品	アイシールド 20枚		マウスシールド 20枚
サイズ (mm)	外装箱	W170×D370×H170	
	梱包箱	W145×D5×H340	
	フィルム	W256×H110	W256×H115

- ※この商品は飛沫を完全に防ぐものではありません。マスクとの併用をおすすめいたします。
- ※ご使用前にルーベ等への装着性を確認ください。装着性に問題がある場合はご使用をお控えください。
- ・記載の仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
- ・記載の製品の色は印刷により実物と若干異なる場合があります。
- ・記載の使用シーンはイメージです。
- ・ご使用にあたっては取扱説明書にしがたい正しくご使用ください。

サンスター技研株式会社 〒569-1134 大阪府高槻市朝日町 3-1

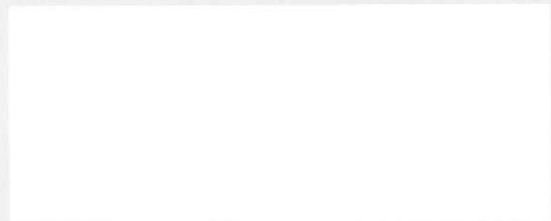

発注に関するお問い合わせはサンスター株式会社 歯科営業部へお願いします。

TEL:072-682-4733

このリーフレットの記載内容は2021年4月20日現在の物です。

QAIS

— shield —

「カラダがよろこぶ空気。」



SUNSTAR

SUNSTAR

サンスターは自転車部品やパンク修理用ゴム糊の製造販売業として1932年に起業しました。その後、ゴム糊を入れていた金属チューブにハミガキペーストを入れて発売したところ好評となり、現在のオーラルケア・健康食品・化粧品などからなる消費財事業に結びついています。一方、自転車用部品やゴム糊の事業は、オートバイ・自動車用の金属部品と自動車・建築・電子機器用の接着剤・シーリング材などからなる生産財事業に発展しました。

サンスターは世界20ヶ国に拠点を持ち、90ヶ国以上に製品・サービスを提供、世界の人々がいつまでも健やかで心豊かな生活が送れるよう、お口、からだ、生活空間・移動空間も含めた人々の健康的で快適な生活をサポートしています。

最前線のプロフェッショナルが選ぶ 歯科医専用フェイスシールド



歯科医の声から生まれたルーペ対応型フェイスシールド

機能性と審美性で快適な空間をつくる

様々なシーンでの活躍が増えてきたフェイスシールド。一方で歯科現場で働かれている方々にヒアリングしていると、様々な施術シーンに適したフェイスシールドへのニーズがあることが分かりました。

そこで当社は、歯科などにおけるルーペを着用する施術シーンに適したルーペ対応型フェイスシールドを開発しました。

ルーペを着用した細かな作業の際にも、作業の邪魔にならず飛沫への対策を実施頂けます。



アイシールド

マウスシールド

フェイスシールド


QAIS -shield- の特長

特長 3.
側頭部で固定でき、
顔の鼻先前を通る
フレーム

側頭部固定型フレーム※1

特長 4.
上下別の
セパレート式

アイシールド+マウスシールド

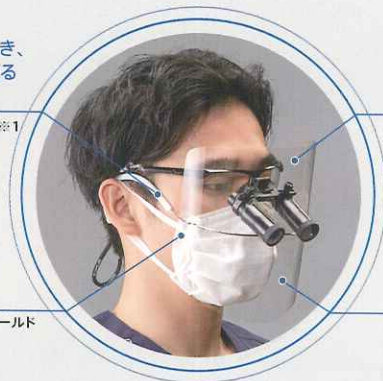


特長 1.
ルーペ対応型
アイシールド

特長 2.
拭いても
長続きする防曇性

ライト付きルーペ用も上記と同様です。 ※1 特許、意匠出願中。

さまざまなルーペに対応するアイシールド

ルーペとの併用が難しかったフェイスシールドを使った飛沫対策が可能になります。曇り、反射、ゆがみなどの視界不良に繋がる併用時の課題を解決し、かつ幅広いルーペの仕様に対応した設計です。

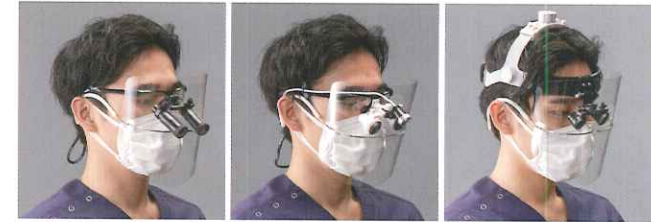


アイシールド(ルーペ用)

アイシールド(ライト付きルーペ用)

ヘッドギアタイプにも対応可能

独自開発の セパレートタイプ

アイシールドとマウスシールドの2つのパーツを組み合わせるセパレート式です。使用シーンや用途に応じてフォームの変更が可能となっています。マウスシールドは施術中に胸・肩にあたりにくいように設計し、作業性を損なわない形状を採用しています。

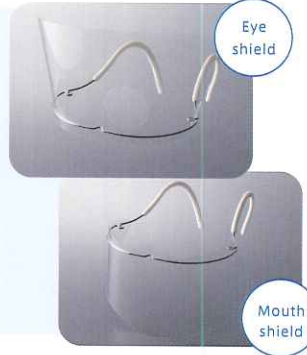

Eye shield

Mouth shield



施術中の視認性を維持する 優れた防曇機能

高透明の防曇加工トリアセチルセルロース(TAC)フィルムを採用。払拭清掃をしても防曇効果が落ちにくく、施術時の視認性を維持します。※

※表面処理防曇加工フィルムと比較

ズレにくく、疲れにくい 側頭部固定式フレーム

長時間装着していても疲れにくい側頭部ホルド形状で施術中のズレや装着による違和感を防ぎます。また額への接触が無く清潔感を保ちます。

