



ウォッシャーディスインフェクター MWD-80UA2

ホシザキ製
国内生産

手洗いでは難しい
80℃×10分
消毒

A₀値：600

※熱水消毒コースを選択の場合

上下ノズルで
徹底洗浄



医療器具を洗浄から消毒まで1サイクルわずか約25分で洗い上げるホシザキのウォッシャーディスインフェクター。スピーディーな洗浄時間と確かな洗浄能力でホシザキのテクノロジーが医療の現場を支えます。

[洗浄・消毒]
1サイクル最短約25分[※]



○ 1サイクルの工程 (当社指定の酵素系洗剤：標準コース)

予備洗浄

本洗浄

すすぎ

消毒


温度：40℃以下

温度：40～50℃

温度：50～60℃

温度：80℃

○ 歯科用インストルメントに対応する専用ラック (オプション)

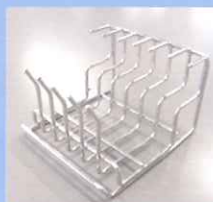


※標準コース、当社指定の酵素系洗剤を使用、初期給湯温度60℃とした場合の洗浄・消毒時間です。給湯機の設置状況により1サイクル時間が異なる場合があります。

一般医療機器 器具除染用洗浄器 35424000 医療機器製造販売届出番号 3282X00001000003

【設置事例】千葉県 A 歯科医院 様

卓上設置可能なコンパクトサイズ
幅 630× 奥行 450× 高さ 580mm


奥行き45cmの薄型で置き場所に困りません。清潔感のあるやさしいホワイトカラーで、限られたスペースでも圧迫感がありません。

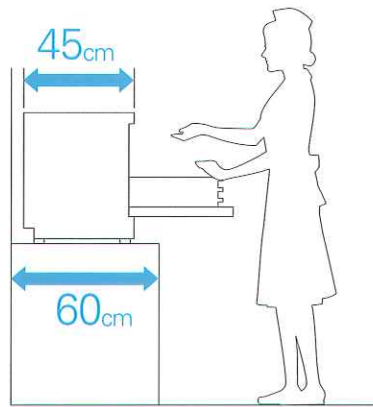

□庫内のお手入れも簡単、衛生的



取り外しもカンタン設計

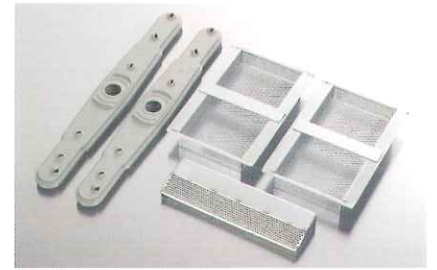

お手入れ部品は5点

WASHER DISINFECTOR



ホシザキウォッシャーディスインフェクター MWD-80UA2

価格 **¥1,164,000**

電源	単相200V 50 / 60Hz 容量3.2kVA(16.0A)
電流	運転電流 15.6 / 15.8A 電動機定格電流 1.0 / 1.1A 始動電流 2.2 / 2.1A
消費電力	電動機定格消費電力 180 / 220W(力率90 / 96%) 電熱装置定格消費電力 3000W 最大消費電力 3115 / 3145W
乾燥機能	なし
外形寸法	幅620×奥行450×高さ580mm
外装	塗装鋼板(キャビネット)、ステンレス鋼板(ベース)、亜鉛鉄板(リヤ)

※価格は希望医院価格です。(価格には消費税は含まれておりません)

ホシザキ関東株式会社
広域営業部 特販課

修理・メンテナンス
エムシーサービス株式会社

ジーシーグループ

[販売元]

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288



JAPAN DENTAL SUPPLY

ご用命は