

様々な治療スタイルを One System で効率化

Tetric® N-Line

世界中で愛され続けるIvoclarの
コンポジットレジン
テトリック N-ライン

NEW



大きな窩洞には、 One ステップ充填で効率化を

テトリック N-フロー バルクフィル

NEW

手にスッとフィットする
持ちやすいデザイン

一気に流れる
φ1.2mm
カニューレ

4mm 1塊充填を5秒*で

*LED光照射器 2,000mW/cm²

力を入れやすい形状

1つのシェードでカバー
ユニバーサルタイプ

効率的な3つの理由



5秒*で
固まる

Ivoclarが開発した「イボセリン (Ivocerin®)」と「アセンシオテクノロジー」が、5秒重合*を可能にします。イボセリンは、「5秒重合」に欠かせない重合開始材。アセンシオテクノロジーは、4mmの深さにも照射光を奥底まで届ける技術。これらが「5秒重合」を実現し、未重合の不安を軽減します。

最小限の
シェード選択

1つのシェードで多くの症例がカバーできるユニバーサルタイプ (IVA)。IVAとは、Ivoclar (IV) が独自に定義するAシェード系の意味で、A系シェードへ自然とマッチさせます。

スピード充填

カニューレから一気に流れるハイフローの流動性。治療時間の短縮に繋がります。Ivoclarならではのフロアブルレジンをお試しください。



何がすごい？
イボセリン

<https://vimeo.com/699309387/57d36d4ab7>



アセンシオ
テクノロジーとは？

<https://vimeo.com/701941311/640e22e089>

Your system, Your choice



テトリック N-フロー バルクフィル



治療スタイルに合わせて、
組み合わせを自由に選択

フロータイプ

小さな窩洞には、美しいカメレオン
効果が期待できるフロータイプ




テトリック N-フロー



ペーストタイプ

前歯や咬合面は、ペーストタイプで
美しく成形。カメレオン効果も。

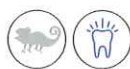

テトリック N-セラム



ペーストタイプ

咬合面を丸ごと4mmバルクで
成形できるペーストタイプ



テトリック N-セラム
バルクフィル



自然に馴染む色合い カメレオン効果		バルク重合 (4mm)	
ブリーチ・トランスシェード		5秒照射 (2,000mW/cm ²)	
コントロールしやすい流動性 チクソトロピー性		IVAでA-シェードにカラーマッチ ユニバーサルシェード	

Delivery forms

製品内容

フロータイプ



テトリック N- フロー バルクフィル

シリンジ 各 2g × 1

681364AN IVA 681373AN IVB 604027AN IVW

テトリック N- フロー

シリンジ 各 2g × 1

604046AN A1 604047AN A2 604048AN A3 604049AN A3.5
604050AN A3.5 D 604051AN A4 604052AN B2 604053AN T
604054AN BL L 604055AN BL I

キャビフィル 各 0.25g × 10

604056AN A1 604057AN A2 604058AN A3 604059AN A3.5
604060AN A3.5 D 604061AN A4 604062AN B2 604063AN T
604064AN BL L 604065AN BL I

テトリック N-ファミリー シェードガイド

604023AN 1個



テトリック N- フロー バルクフィル 用チップ
カニューレ ブラック (Ø1.2mm)

669838 20個 × 1



フロー用 アプリケーター
カニューレ ブラック (Ø1.1mm)

597315 20個 × 1



キャビフィル インジェクター

627882AN 1個



ペーストタイプ



テトリック N- セラム バルクフィル

シリンジ 各 3.5g × 1

644171AN IVA 644172AN IVB 644173AN IVW

テトリック N- セラム

シリンジ 各 3.5g × 1


604025AN A1 604026AN A2 604027AN A3 604028AN A3.5
604029AN A3.5 D 604030AN A4 604031AN B2 604032AN T
604033AN BL L 604034AN BL I

キャビフィル 各 0.25g × 10

604035AN A1 604036AN A2 604037AN A3 604038AN A3.5
604039AN A3.5 D 604040AN A4 604041AN B2 604042AN T
604043AN BL L 604044AN BL I

テトリック N-セラム バルクフィル シェードガイド

644153 1個

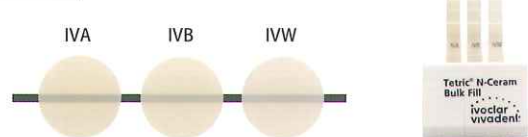

	A1	A2	A3	A3.5	A4	B2	A3.5D	T	ブリーチL	ブリーチI
テトリック N-フロー/セラム										
透過性	エナメル 11.5 ± 1% (天然エナメル質 11 ~ 13%)						デンチン 7 ± 0.5% (天然象牙質 7 ~ 8%)		トランス 15 ± 1%	

トランスシェードの特長

T (Trans) 透過性が高い前歯部用シェードです。

BL-L (Light) 透過性が高い材料で、一般的に漂白歯や乳歯に適しています。

BL-I (Incisal) 透過性が高い前歯部のオレンジがかったオパール効果を再現できます。



テトリック N
製品詳細

www.ivoclar.com/ja_JP/CMS/brochures/Tetricline_spec.pdf

一般的名称：歯科充填用コンポジットレジン / 販売名：テトリック N- フロー バルクフィル / 認証番号：302AGBZX00137000 / 管理医療機器
 一般的名称：歯科充填用コンポジットレジン / 販売名：テトリック N- セラム バルクフィル / 認証番号：225AGBZX00011000 / 管理医療機器
 一般的名称：歯科充填用コンポジットレジン / 販売名：テトリック N- セラム / 認証番号：220AKBZX00010000 / 管理医療機器
 一般的名称：歯科充填用コンポジットレジン / 販売名：テトリック N- フロー / 認証番号：220AKBZX00027000 / 管理医療機器
 一般的名称：歯科用充填器 / 販売名：キャビフィル インジェクター / 届出番号：13B1X10049IV0025 / 一般医療機器

Ivoclar Vivadent 株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24
TEL:03-6801-1301 FAX:03-5844-3657

ivoclar.com
info.japan@ivoclar.com