

石灰化根管の穿通に！

ベントエンド  
カルシファイル



**Calcifile**

刃部先端径:0.08mm 作業部長さ:16mm 針部全長:25mm

ファイリング



穿通後



- カルシファイルは、ベントエンド ユニバーサルエンドハンドルに装着して使用する予め曲げ加工が付与された手用の穿通用ファイルです。
- 特別に設計されたフルート形状（らせん状の溝）のため、根管壁への引っかかりを軽減し、スムーズに穿通させることができます。
- コシが強く硬いステンレス鋼製ファイルのため、狭窄した石灰化根管などの 抵抗感ある根管壁でも、穏やかに慎重に往復させながら、穿通させることができます。
- #08ファイルのため、通常の狭い根管のネゴシエーションやファイリングにも使用することができます。
- オートクレーブ滅菌可能（121℃、20分以上 または 126℃、15分以上）

ベントエンド カルシファイル

ベントエンド  
カルシファイル 6本入



内容:ベントエンド カルシファイル 6本入 1箱

歯科医院様参考価格 **¥3,000**

ベントエンド カルシファイル  
+  
ユニバーサルエンドハンドル セット



内容:ベントエンド カルシファイル 6本入 1箱  
ベントエンド ユニバーサルエンドハンドル グレー 1本

合計歯科医院様参考価格 **¥12,800**



ベンタエンド ユニバーサルエンドハンドルとカルシファイルの併用により、スムーズに穿通でき、術者および患者様の負担を軽減します。



手用ファイルによる穿通は、手指で術野が遮断され、アクセスしにくく、手指も疲労します。



ベンタエンド ユニバーサルエンドハンドルとカルシファイルの併用による穿通は、術野を明視化し、時間短縮ができます。

ベンタエンド カルシファイル ご使用例

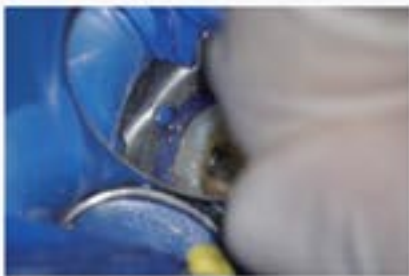


図1 指用ファイルのみの探索では視野が妨げられて動かしづらいことがある。



図2 Universal EndoHandle に Calcifile を装着した。ファイルは予め屈曲されている。



図3 術野も明瞭かつ、探索は容易、口蓋根は頬側へと合流していた。

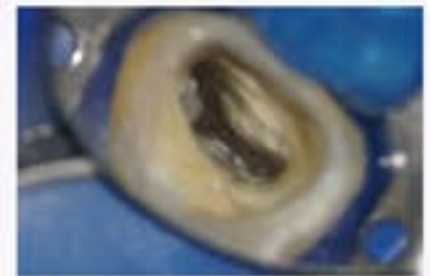


図4 拡大すると全ての根管が合流し、1根管となった。

臨床写真ご提供：宮島 大地 先生（新百合ヶ丘 1000 のバイオリン歯科）

関連製品



ハンドルカラー：グレー、パープル、シルバー、イエロー、レッド

■ 歯科用ファイルは付属されておりません。ご使用の歯科用ファイルのサイズ #08(グレー)、#10(パープル)、#15(ホワイト)、#20(イエロー)、#25(レッド)に合わせてハンドルカラーをご選択いただき、歯科用ファイルを装着されますと、識別が容易にできます。 ※ISO規格の手用ユニバーサルファイル装着することができます。 ※手用ファイルのハンドルの大きさによって装着できない製品もありますので、ご注意ください。

ベンタエンド ユニバーサルエンドハンドル

●キット 5本入 ..... 歯科医院様参考価格 **¥47,500**  
内容：グレー、パープル、シルバー、イエロー、レッド 各1本入

●1本入 ..... 歯科医院様参考価格 各 **¥9,800**  
●グレー 1本入  
●パープル 1本入  
●シルバー 1本入  
●イエロー 1本入  
●レッド 1本入

モリムラ  
ホームページ  
カルシファイル  
製品情報ページは  
こちらから⇒



本紙に掲載されている価格は2023年1月のもの（税抜）です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

カルシファイル 医療機器届出番号：13B1X10394170001  
製造業者：Venta Endo（ベンタ エンド社） 製造国：アメリカ合衆国（USA）

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは  
お客様窓口フリーダイヤル

TEL. 0120-33-8020 FAX. 0120-66-8020

MORIMURA

株式会社モリムラ

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10  
TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351  
http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は