

オサダが口腔外科の新しい扉を開く

# OSADA SURGERY SUCCESS *Ip*

電動式骨手術器械

オサダ サージェリー サクセス Ip



### 多様な手術に対応した マルチファンクション

- インプラント埋入から顎変形症等の手術まで一台で幅広く対応する口腔外科手術用機器。
- 2本のモータを備え、目的に応じて使い分けができます。(OSS-lp-II)


### 正確で快適な 手術をお約束

- ブラシレスモータを使用し、芯ブレが少なく、微細な手術も正確、確実に行えます。
- 切削面がきれいで、術後の経過も良好、患者様への負担が軽減されます。

### オサダサージェリーサクセス *lp* 3つの特長

#### すばやい対応が可能な 優れた注水機能

- 注水準備スイッチで自動的にチューブ先端まで水が送られ、すぐ使用できる状態になります。
- モータの回転停止と同時に注水ポンプが逆転し、液ダレを防ぎます。

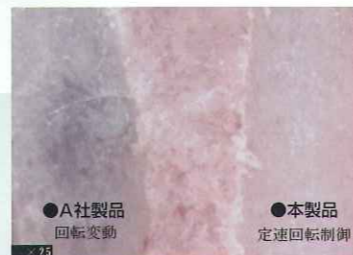

切削面

●**本製品**  
切削負荷による回転速度の変動が無い為、切削面が非常にきれいです。

●**A社製品**  
切削負荷により回転速度が変動しているため、切削面が波っています。

※定速回転制御  
骨切削に負荷がかかっても回転速度が変動しないため、安定した切削が行え、切削面が滑らかになります。

### 芯ブレが少ないブラシレスモータ

- モータは回転速度 1,000~30,000min<sup>-1</sup>、トルクは 5Ncm の高性能。
- インプラント埋入には減速コントラアングルハンドピース 32:1 が使用できます。コントラアングル上部が一部フラットになっているため、インプラント埋入に適したグリップ感が得られます。(ハンドピース装着時は、回転速度 30~1,250min<sup>-1</sup>、トルクは 5~50Ncm)
- モータ、モータコードまでオートクレーブ滅菌ができます。



インプラント用



外科用

### 簡単操作のインターフェース

- 見やすい大型液晶画面と使いやすい操作パネル。
- ドクターの術式や症例に合わせて回転速度、注水量、トルクのメモリーが各モータに5パターン設定可能です。
- 本体に触らず、フットコントローラーでも各種設定操作が可能で衛生的です。



フットコントローラー



インプラント  
モード-1



インプラント  
モード-2




口腔外科  
モード

### 使用例 (口腔外科分野での代表的な術式)


- 下顎枝矢状分割術
- オトガイ形成術
- 下顎枝垂直骨切術




ソーレシプロケット  
ハンドピース使用  
3.0mmのストロークで  
短時間で切削可能

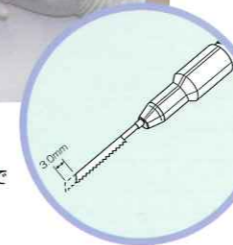

ソーサージタル  
ハンドピース使用  
振れ角度: 4°

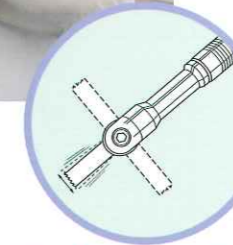

ソーオシレート  
ハンドピース使用  
刃物取付角度: 180°取付  
可能  
振れ角度: 7°

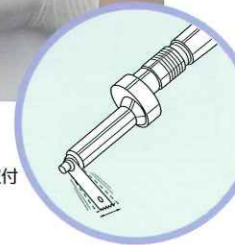

※これらの商品はオプションです。刃物は販売しておりません。刃物については下記メーカーのものをお使いください。

### 各社の刃物を使えます



各社のマイクロサージェリー関係の刃物をご使用頂けます。

	ストライカー社製	エースクラップ社製	ジンマー社製	コメット社製
ソーレシプロケットハンドピース (SRH01)	○	○	○	○
ソーレシプロケットハンドピース (SRH02)	○	○	○	○
ソーオシレートハンドピース	一部のみ	一部のみ	○	○
ソーサージタルハンドピース	×	×	○	○

※詳細はお問い合わせください。

# ハンドピース&オプションパーツ

※ロングバーを用いる時は、必ずバーにあうノーズコーンを使用下さい。

ソーレシプロケット ハンドピース  ストローク 1.7mm		ソーレシプロケット ハンドピース2  ストローク 3.0mm		ソーレシプロケット 注水ホルダー 		ソーサージタル ハンドピース  振れ角度 4°		ソーサージタル 注水ホルダー 	
形式	SRH01	形式	SRH02	形式	—	形式	SSH01	形式	—
商品コード	75982	商品コード	50063	商品コード	50019	商品コード	75417	商品コード	50018
ソーオシレート ハンドピース  振れ角度 7°		ソーオシレート 刃物アダプター 		ソーオシレート 注水ホルダー 		オサダサージェリーモータ 		減速コントラアングル ハンドピース 32:1 	
形式	SOH01	形式	SOH-AD	形式	—	形式	SM1-02	形式	CSR32
商品コード	75686	商品コード	50021	商品コード	50020	商品コード	52593	商品コード	53261

ノーズコーン SP  刃物全長 40~50mm シャンク長 32mm以上		ノーズコーン MP  刃物全長 55~60mm シャンク長 49mm以上		ノーズコーン LP  刃物全長 65~70mm シャンク長 58mm以上		等速アングルハンドピース  回り止め付		倍速アングルハンドピース  回り止め付		等速注水付き コントラヘッド 		注水付き 1/2 減速コントラヘッド 	
形式	—	形式	—	形式	—	形式	SH27LP	形式	SH31LP	形式	CH11B	形式	CH17
商品コード	41830	商品コード	41836	商品コード	41842	商品コード	50015	商品コード	50016	商品コード	40098	商品コード	70049
等速コントラシャンク 		洗浄用チューブホルダー付き  (10ヶ単位)		洗浄用チューブ HP20  (20ヶ単位)		ソーオシレート 刃物アダプター S 		ソーオシレート 刃物アダプター A 		ソーオシレート 注水ホルダーロング 		ソーレシプロマイクロサ アダプター 	
形式	CS132	形式	OSS-350	形式	HP20	形式	SOH-ADS	形式	SOH-ADA	形式	—	形式	SR-MSAD
商品コード	38849	商品コード	50218	商品コード	41955	商品コード	46521	商品コード	46522	商品コード	46524	商品コード	46525

## ■オサダサージェリーサクセス Ip 仕様



カバー (本体カバー)	
形式	—
商品コード	41823

本 体	電源	電源電圧	交流 100V
		電源周波数	50/60Hz
		電源入力	0.34A
		注水量	20-100ml/min
		寸 法	W210×D300×H525mm (ハンガー込み)
オサダサージェリーモータ	質量	7.9Kg	
	回転速度	1,000~30,000min-1	
等速ストレートハンドピース	停止トルク	5Ncm	
	回転速度	1,000~30,000min-1	
フットコントローラー	寸 法	W206×D186×H38.4mm	
	質量	2.0Kg	
標準装備 (OSS-Ip-II)	本体・等速ストレートハンドピース×1・オサダサージェリーモータ×2 フットコントローラー×1・ハンガー×2 (OSS-Ip-Iは、全て×1です)		
承認番号	22200BZX00813000		

商品コード	商品名	形 式	備 考
3257	オサダサージェリーサクセス Ip	OSS-Ip-I	モータ 1 本仕様
3260	オサダサージェリーサクセス Ip	OSS-Ip-II	モータ 2 本仕様

販売元

**長田電機工業株式会社**  
〒141-8517 東京都品川区西五反田5-17-5  
TEL 03 (3492) 7651 FAX 03 (3492) 7506

<http://www.osada-electric.co.jp>

製造販売元/長田電機工業株式会社

※ 表示価格は全て税別です。消費税を別途申し受けます。

※ 実際の商品の色は印刷と異なる場合があります。

※ 商品は改良の為、予告なしに仕様を変更することがありますので予めご了承下さい。又、ご不明な点はオサダ営業所にお問い合わせ下さい。

札幌	011 (747) 1391	千葉	043 (278) 6152	大阪	06 (6398) 6027	鹿児島	099 (256) 6869
盛岡	019 (653) 5464	西東京	042 (524) 9186	神戸	06 (6398) 6027	沖縄	098 (862) 0683
仙台	022 (262) 1705	東京	03 (3494) 2271	山陽	086 (214) 6950	OSADA, INC.	
新潟	025 (265) 3710	神奈川	045 (441) 3151	広島	082 (241) 7165		
宇都宮	028 (638) 5185	長野	0263 (47) 7060	高松	087 (814) 9581		
水戸	029 (231) 6771	静岡	054 (252) 0642	福岡	092 (431) 7774		
埼玉	048 (652) 0401	名古屋	052 (932) 0631	熊本	096 (383) 6770	NO.1118	



ISO 14001 JAEI 0211  
長田電機工業株式会社