

ジェントルスティム

干渉電流型低周波治療器



摂食嚥下障害に対するリハビリテーションを干渉電流でサポート





痛みの少ない干渉波刺激が神経に作用し、
 摂食嚥下障害に対するリハビリテーションをサポートします。
 充電式で持ち運びしやすく、
 シンプルな操作で電流の強さを調整できるため、
 どこでもすぐに治療ができます。

干渉波イメージ

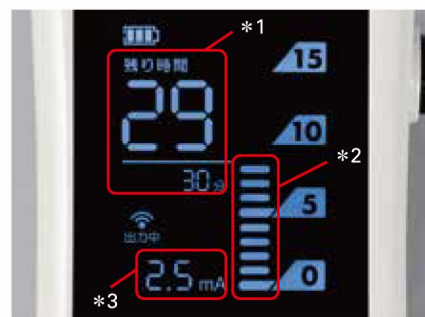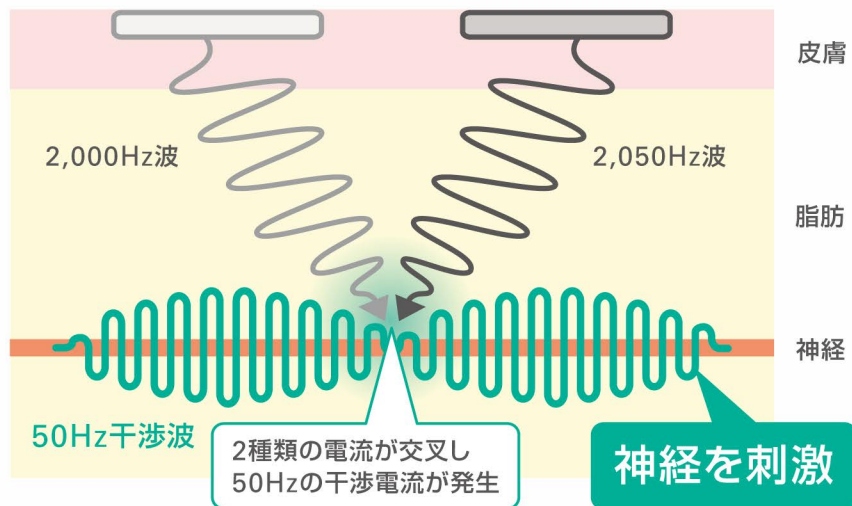

わかりやすい操作

タイマー機能 *1

治療、リハビリの時間に合わせてタイマーをセッ。設定時間と残り時間が表示されます。

出力の調整 *2

▲▼ボタンで調整します。見やすいレベルインジゲータを表示します。

治療時の出力電流を表示 *3

実際の出力の強さを確認しながらレベルの調整ができます。

ジェントルスティムの干渉波刺激

ジェントルスティムで採用している干渉波の周波帯域の電流では、皮膚抵抗が低くなり体表皮膚面での不快なピリピリ感が軽減できます。中周波電流は低周波電流と比較して皮膚深部まで到達する特徴があり、体内深部組織まで浸透します。

消耗品

ゲルパッド電極
 押さえシート



ゲルパッド電極



商品構成

ACアダプタ



電極コード



治療器本体



充電台



ジェントルスティム

仕様

出力電流：最大3.4mA (実効値)
 出力周波数：2000Hz (干渉50Hz)
 治療タイマー：5~30分

本体：W76×H160×D30mm

充電台：W87×H62×D192mm

本体：約250g

充電台：約160g

電氣的定格

本体 定格電源：DC3.6Vまで

消費電力：0.8 VA

充電台 定格電源：DC12V

消費電力：3VA

ACアダプタ 定格電源：AC100-240V,

50/60Hz, 0.29-0.16A

型番：MPU12A-105

定格出力：DC12V, 1A

202740001

別売品

ゲルパッド電極 3パック

202740005

ゲルパッド電極 押さえシート 3パック

202740010

キャリングケース

202740020



販売名 ジェントルスティム
 一般名称 干渉電流型低周波治療器
 医療機器認証番号 227AHBZX00026000
 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) /
 特定保守管理医療機器

●標準価格の後の9ケタの数字は品目コードです。●掲載商品の標準価格は、2021年1月21日現在のもです。標準価格には消費税等は含まれておりません。

製造販売 株式会社フードケア 神奈川県横浜市緑区橋本4-19-16 OMGビル 〒252-0143
 販売 株式会社 モリタ 大阪本社：大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06-6380-2525 東京本社：東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03-3834-6161
 お問合せ お客様相談センター T 0800-222-8020(フリーコール)※歯科医療従事者様専用
 www.dental-plaza.com

PUB NO. M5705.2.2102.1.000LI.IO/ST 208530341