

仕様一覧 ※ベースマウントタイプはMチェアとの組み合わせになります

ドクターユニット部				カスビダー部							
インストルメント	M仕様	A仕様	コントロール	M仕様	A仕様	スピットン	M仕様	A仕様	アシスタント	M仕様	A仕様
ホルダータイプ	●	●	マイクロモーター回転数表示	●	—	コップ給水(センサータイマー式)・ボール洗浄(タイマー式)	●	●	セントラルバキューム(遅延付)	●	●
ハンドピース3本掛け(シリンジ含む)	●	●	マイクロモーター正逆切替スイッチ	●	—	水クリーンフィルター	▲	▲	エアバキューム	▲	▲
ハンドピース回路追加(5本まで)	▲	▲	コップ給水スイッチ	●	●	エアグリーンフィルター	▲	▲	セントラル排唾	▲	▲
77型シリンジ	●	●	スライド式フットコントローラー	▲	—	オートセパレーター(CS1)	▲	▲	77型シリンジ	●	●
BT14シリンジ	▲	▲	踏込式フットコントローラー(水切替スイッチ付)	●	●	セパレーター(BTK)	▲	▲	BT14シリンジ	▲	▲
DA-281	▲	▲	フットコントローラーキャリア	▲	▲	水用サービスカプラー	▲	▲	温水器	●	●
DA-NM501	●	—	アクセサリ	M仕様	A仕様	エア用サービスカプラー	▲	▲	ライト部		
MCXマイクロモーター	▲	—	パノラマサイズビューア(固定式)	▲	▲	チェア部	Mチェア	カンタ チェア	S字ボール	●	
パリオス2スケラー	▲	▲	デンタルサイズビューア	▲	▲	シームレスクッション(11色)	●	●	ストレートボール	▲	
ライト付タービン(DA-391XKV)1本仕様	●	●	汚物入れホルダー	●	●	ラグジュアリーシート(8色)	▲	▲	ステラライトヴィータ	●	
ライト付タービン回路2本以上仕様	▲	▲	シリコンマット	●	●	ロールアップレグレスト	▲	—	患者用ミラー(ステラライトヴィータ)	▲	
着脱式ハンドピース	●	●	紙コップ汚物入れ	●	●	マニュアルヘッドレスト	—	●	液晶モニターブラケット	▲	
フラッシュアウト	▲	▲	大型テーブルトレイ(OAタイプのみ)	▲	▲	2関節ヘッドレスト	●	▲	ティッシュボックス	▲	
			ワンタッチガスバーナー(ボンベケース付)	▲	▲	パワーヘッドレスト	▲	—			
			マウストレー	▲	▲	アームレスト左	●	●			
						アームレスト右	●	▲			
						ジョイスティックスイッチ(ヘッドレスト、チェアマニュアル、チェアオナー)	▲	—			
						チェア操作フットスイッチ	—	▲			
						患者用小型テーブル	▲	—			

M仕様…マイクロモーター仕様 A仕様…エアモーター仕様 ●…標準 ▲…オプション

販売名	一般的名称	届出・認証番号	クラス分類	特定保守	設置管理	製造販売元
ベルキュール	歯科用ユニット	224ACB2X00053000	管理	該当	該当	ベルモントテクノロジー株式会社
ベルキュールチェア	歯科診査・治療用チェア	27B1X00042001035	一般	該当	該当	タカラベルモント株式会社
クレール チェア	歯科診査・治療用チェア	27B1X00042001022	一般	該当	該当	タカラベルモント株式会社

安全にお使いいただくために

⚠

- ◎ご購入前に、設置場所・使用条件・用途をご確認ください。
- ◎ご使用前に添付文書、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●製品の仕様・デザイン・寸法は、予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。 ●写真はカラー印刷のため実物の色とは多少異なる場合があります。 ●実際の製品にはご使用上の注意ラベルが貼付されています。



BELCURE

ベルキュール

タカラベルモント株式会社 <https://www.takara-dental.jp>

[大阪本社] 〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1
[東京本社] 〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-19



札幌 (011)863-2007 盛岡 (019)652-9744 仙台 (022)232-4480 郡山 (024)925-0742 新潟 (025)268-0333 さいたま (048)640-5900 千葉 (043)302-0267
東京 (03)3405-6877 横浜 (045)681-6241 名古屋 (052)932-6251 金沢 (076)221-8412 京都 (075)241-3425 大阪 (06)6212-3602 神戸 (078)231-6751
岡山 (086)233-8825 広島 (082)278-2411 高松 (087)862-3480 福岡 (092)411-2746 鹿児島 (099)226-9481 沖縄 (098)897-6656

コールセンター
TEL(0120)194-222 [フリーダイヤル]
※コールセンターはタカラベルモント株式会社が修理および点検を委託するベルモントコミュニケーションズ株式会社の受付窓口です。

製造販売元
株式会社ナカニシ 〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700
ビエン・エア・アジア株式会社 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-40-12
タカラベルモント株式会社 〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋2-1-1
ベルモントテクノロジー株式会社 〒136-0072 東京都江東区大島8-19-13





CONCEPT

easy

機能とコストを追求した“ベーシックキュアユニット”
機能はシンプルに徹し、効率的なオペレーションを
提供します。

to use

Drの診療ポジションに合わせて容易にアクセスできることで、
診療中の負担を軽減します。

for treatment

より効率的な治療実現の為に
直感的に操作できるユーザビリティを実現しました。

maintenance

長年信頼され続けてきたエアシステムを継承し、故障の少なさ、
修理の簡便さで長期のご使用をサポートします。

to buy

効率化、ストレスフリー、高機能を充実させながらも、
低コスト化を実現しました。



BASE MOUNT TYPE

※ベースマウントタイプはMチェアとの組み合わせになります。



OVER ARM TYPE



CART TYPE

※写真はオプションが含まれています。

やわらかく、やさしいテイストが患者さんの心をほぐします。



LUXURY SEAT

ラグジュアリーシートもお選びいただけます



Mチェア カンターチェア
COLOR VARIATION
SHレザー



M CHAIR



パワーヘッドレスト

ハンズフリーで操作できる電動式ヘッドレスト。頭部を安定させた状態でジョイスティックスイッチにより頭の角度を変えることで、患者さんの身体的負担も小さく、スムーズなポジション移行が可能です。



2関節ヘッドレスト

患者さんの頭の位置に合わせて、マニュアルで自由に調節できます。子供や高齢者の患者さんの頭もしっかりとホールドします。



アクシス機構

患者さんの腰部とバックレストの回転支点を近似させることで、シート上の身体の動きをしっかりとトレース。リクライニング時などの姿勢移動に伴う、背ずれなどの不安感を軽減しました。



ジョイスティックスイッチ

足元でチェアの操作ができます。椅子のマニュアル操作・椅子のオート操作・ヘッドレストの操作の3種類があります。

CONTOUR CHAIR



昇降ストローク

初高400mmと、公園のベンチ等とほぼ同じ高さで患者さんに安心してお座りいただけます。また、800mmまで上昇し、立位での外科処置等、さまざまな治療に対応します。



フットスイッチ

3つのプリセットポジションと昇降寝起きの微調整を、足元で容易にコントロールできます。



アームレスト右

右側のアームレストは外側に回転するため、チェアサイドからの誘導をスムーズに行えます。




アクシス機構



2関節ヘッドレスト



Mチェア カンターチェア
COLOR VARIATION ESレザー 全11色

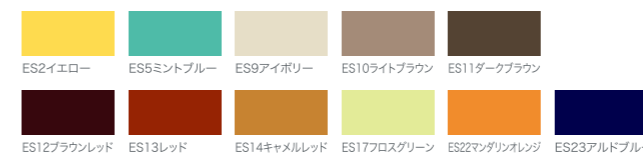

※掲載レザーカラー以外は特注費が発生します。

DOCTOR UNIT

必要な機能を絞り込み、
シンプルなデザインに仕上げました。



マイクロモーター仕様



パネルスイッチ操作一覧	
椅子操作	その他
① 椅子マニュアルスイッチ	③ コップ給水スイッチ
② 椅子プリセットスイッチ (1・2)	④ ハンドピース操作
④ 椅子オートリターンスイッチ (0)	⑤ マイクロモーター正逆切替スイッチ
⑤ 椅子ラストポジションスイッチ (LP)	⑥ マイクロモーター上限回転速度制御ノブ



仕様



DA-NM501 マイクロモーター (DA-290X-LC, DA-290X-S込)




エアモーター仕様



パネルスイッチ操作一覧	
椅子操作	その他
① 椅子マニュアルスイッチ	③ コップ給水スイッチ
② 椅子プリセットスイッチ (1・2)	
④ 椅子オートリターンスイッチ (0)	
⑤ 椅子ラストポジションスイッチ (LP)	



仕様

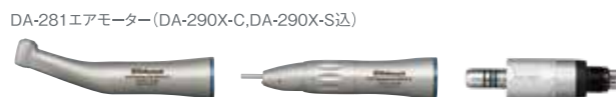

DA-281 エアモーター (DA-290X-C, DA-290X-S込)

OPTION



マウストレー

チェアサイドで、自由にマウスをご使用いただけます。
※マウスの読み取り方法によってはご使用いただけない場合がございます。



パリオス2スケーラー

iPiezoエンジン搭載
チップの先端にかかる負荷を感知し、常に安定したスケーリングが行えます。



ティッシュボックス

うがいの後などに使用するティッシュをセットできます。厚さ6cmまでのボックスティッシュに対応します。



液晶モニターブラケット

患者さんへの情報提供や、院内の情報共有に役立つ液晶モニターを搭載することができます。



患者用小型テーブル(Mチェアのみ)

患者さんの携帯電話などの小物を置く小型テーブルにアンビリカルホース収納機能を加えました。配線・配管を隠すことで、すっきりした印象になります。



歯科ユニットウォーターライン除菌装置 ポセイドンS(タイプ)

残留塩素濃度を補正し、給水管路内の除菌能力を維持することで、より衛生的な給水環境をご提案します。

販売名	一般的名称	認証番号	クラス分類	特定保守	設置管理	製造販売元	販売名	一般的名称	認証番号	クラス分類	特定保守	設置管理	製造販売元
ベルモントタービン	歯科用ガス圧式ハンドピース	301ABBZX00047000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ	DA-281 エアモーター	歯科用電気回転駆動装置	222ALBZX0009A01	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ
ベルモント-N	スレートギア-アングルハンドピース	301ABBZX00048000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ	パリオス 170	歯科用多目的超音波治療器	223ALBZX00036000	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ
エクスポース DA-800	歯科用電気回転駆動装置	221ALBZX00019A01	管理	該当	非該当	株式会社ナカニシ							

CUSPIDOR UNIT

清掃性が高いフラットデザインのため、
ながく清潔にご使用いただけます。



DENTAL LIGHT

ステラライトヴィータ

3,000~28,000Luxで無段階で調光でき、高い演色性により自然な色を再現します。タッチレススイッチによりライトのON/OFF、レジモードの切替ができます。

コップ給水センサー

置かれた紙コップを感知するセンサー式の給水方法を採用。さらに給水と連動して、ボウル洗浄も行います。

アシスタントホルダー

アシスタント・インストゥルメントの取り出し、収納ともにしやすいホルダー形状を採用しました。

着脱式ソリッドコレクター

日々のメンテナンスを行うソリッドコレクターをカスピダ前면에配置し、容易にアクセスできます。

