



額帯灯

スパークSLT TruColor

ORASCOPTIC

求めるのは  
明るさだけじゃない



～ルーペライトはNEXT STAGEへ～

製品動画はコチラ



SHOFU INC.

ルーベライトを使用し、A3シェードの人工歯を撮影  
 (当社従来品) (MICDルーベライト) (スパークSLT TruColor)



通常のLED相当の光

より自然な色で確認できる

〈イメージ〉

# 1


## 求めているのは、より自然に近い光

高い演色性\* (自然光に近い光) で、\*\*高いほど自然光に近いスポットライトを当てるように視界を照らし、自然な光で口腔内の色調を確認することが可能です。

# 2

## 身軽なコードレス仕様

診療中コードが邪魔になる煩わしさがなく、断線ありません。また、バッテリー装着時の重量は約32gと軽く、診療中の負荷も軽減されます。

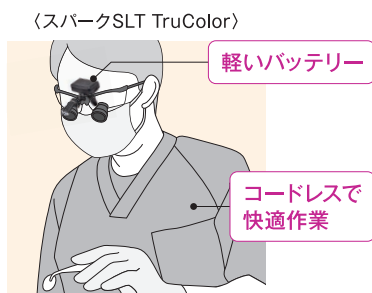

# 3

## 便利な操作性

タッチセンサーに触れるだけでライトのON/OFFが可能です。



取付動画はコチラ

眉間のフレーム部に直接固定する方式のため、多くのルーペや眼鏡に装着可能です。

### 販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
スパークSLT TruColor	額帯灯	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000281

### 包装

#### 額帯灯 スパークSLT TruColor 一式

【内容】ヘッドランプ1、バッテリーパック2、  
 キュアリングフィルター1、ACアダプター1、  
 マイクロUSBケーブル1、ドライバー1、保管ケース1  
 【単品】バッテリーパック  
 キュアリングフィルター  
 ACアダプター(マイクロUSBケーブル付)  
 クリップ付ヘッドランプ

バッテリーパック×2 付属



### 関連製品

#### オラスコープティックルーペ

TTL 3.0 一式  
 【フレーム色】ブラック、ブルー、カーボン※、メルロー※  
 (※のついたカラーは受注発注品です。)  
 【瞳間距離】ナロー、レギュラー、ワイド※  
 【作業距離】ショート(S)、レギュラー(R)、ロング(L)※  
 (※こちらは受注発注品です)

#### オラスコープティックルーペ

TTL 2.5 一式  
 【フレーム色】ブラック、ブルー、カーボン※、メルロー、パープル※  
 (※のついたカラーは受注発注品です。)  
 【瞳間距離】ナロー、レギュラー、ワイド※  
 【作業距離】ショート(S)、レギュラー(R)、ロング(L)※  
 (※こちらは受注発注品です)



双眼ルーペ 一般医療機器 届出番号 26B1X00004000287

倍率	焦点深度(mm)	視野径(mm)	質量(g)
3.0x	190	79	62
2.5x	152	102	53

※上記の数値は参考値です。

### 仕様

型名	910133-11	
使用環境	温度	0~40℃
	湿度	10~85%
	気圧	500~1060hPa
	高度	2000m以下
輸送・保管環境	温度	-20~40℃
	湿度	10~85%(結露のないこと)
	気圧	500~1060hPa
色温度(CCT)	5700K	
光束	32ルーメン	
充電時間	約2時間	
稼働時間	約3時間	
寸法	幅44×奥行73×長さ43mm	
質量	約32g(バッテリーパック装着時)	
バッテリーパック	電源	リチウムイオン充電電池DC3.7V
	定格容量	425mAh
ACアダプター	電源入力	AC100-240V(50/60Hz)
	出力電圧	DC5.0V
作動モード	連続モード	
演色評価指数(CRI)	90+	
電源	内部電源	
EMC規格	IEC 60601-1-2, EN 55011	
安全性規格	IEC 60601-1, IEC 62471	

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

取扱い店