




## 正確なガイドグループを刻み

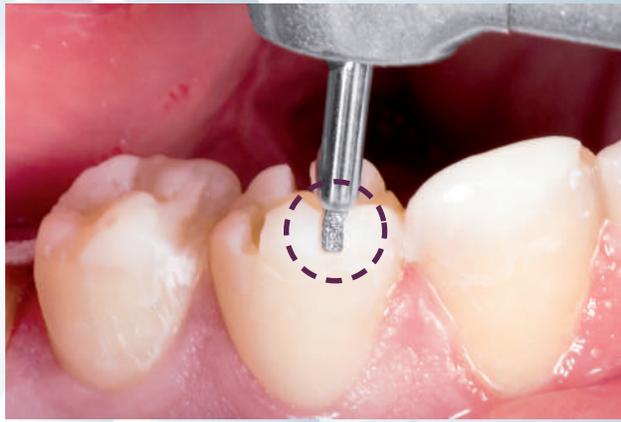

深度のコントロールを可能にする先端形状

## 適正なクリアランスを確保する



4種類の作業長で補綴物によって使い分けが可能

形成量ガイドを適確に

# マーク

# コメット プレップマーカ

Komet diamond bur FG



Quality Products  
Made in Germany

# 1

## 形成量を一定化

IMPORTANT

今までにない独特な先端形状がストッパーの役割を果たすので形成量の過多や不足を防止します


クリアランス不足を防止




### CADCAM 冠の形成量目安

YAMAKIN 様ご提供

小白歯

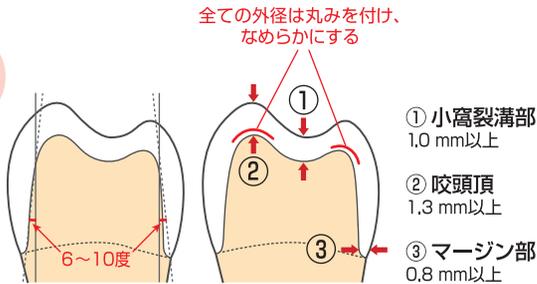

大白歯

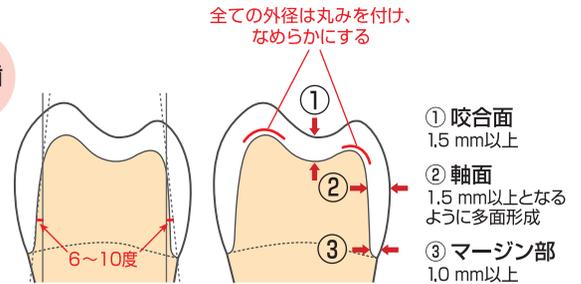

# 2

## 全ての方向から使用可能

ディスク形状のバーでは難しかった咬合面へのガイドグループだけではなく、唇側面や舌側面など全ての方向からでもガイドグループを付与することができます

咬合面への  
グループ付与

唇面への  
グループ付与



# 3

## 作業部の長さを明記

付与したい形成深度を確実・簡単に選べるようにレーザーエッチングで作業長を明記しています(作業長は全部で4種類あります)



イラストはほぼ実物大です

※CADCAM冠にお勧め

前歯部切縁向け

品番	DM05-009	DM10-009	DM15-009	DM20-009
作業長 (mm)	0.5	1.0	1.5	2.0

ダイヤモンド粒子:ミディアム(107μm) 全長: 18mm 作業部径:0.9mm

FG

標準医院価格  
**16,500**  
(合計8本入)



品番	セット#4663
内容	DM-05, 10, 15, 20 各2本入

POINT

5倍速コントラでご使用ください  
適正回転数: 毎分4万回転 (最高16万回転)

医療機器の分類: 一般医療機器  
一般名称: 歯科用ダイヤモンドバー  
販売名: コメットダイヤモンドバー  
届出番号: 27B2X00091000001



製造販売元  
株式会社モモセ歯科商会

お問い合わせは

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL.06-6773-3333 (代)  
東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL.03-3835-2653 (代)  
九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL.092-575-6060 (代)  
URL: http://www.momose-dm.co.jp/