

Mer[★]ssage



メルサーージュ プロフェッショナルケア PMTc用 ブラシ&カップ/コードレスハンドピース

歯科医院用



充実したラインアップで
快適なプロフェッショナルケアを



PMTTC用ブラシ スクリュータイプ/CAタイプ

メルサージュ ブラシ・ブラシ ソフト

デリケートな症状から強固なステインまで
幅広い症例に対応可能なラインアップ



各項目(1～3)から用途に合わせてお選びいただけます

1 | ブラシの細さ・柔らかさ

直径0.2mm

毛の硬いタイプ

メルサージュ (ブラシ)



- 強固なステインや著しい着色を除去
- 効率的にケアを行いたい方に

直径0.07mm

毛の柔らかいタイプ


メルサージュ (ブラシ ソフト)



- 硬組織や軟組織を守りながらやさしく効果的なケア
- 知覚過敏症状などの、デリケートな部位へのケアに


細さの比較

ブラシ毛の拡大写真
(約400倍)

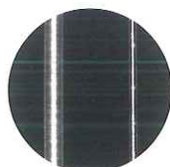

ブラシ ブラシ ソフト


柔らかさの比較

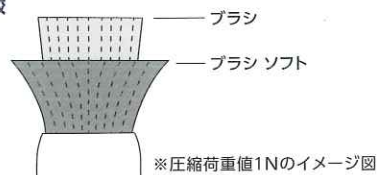

※圧縮荷重値1Nのイメージ図

2 | 接続方法

スクリュータイプ

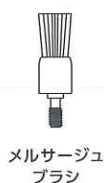


メルサージュ
ブラシ




メルサージュ
ブラシ ソフト

- スクリュータイプのコントラハンドピースでのご使用に

CAタイプ

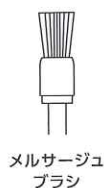

メルサージュ
ブラシ

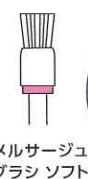


メルサージュ
ブラシ ソフト


注水下でお使い
いただく場合は
CAタイプの
ブラシ ソフトが
おすすめです

- ラッチタイプのコントラアングルハンドピースでのご使用に

3 | ブラシの形状

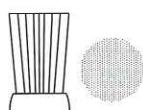

フラット

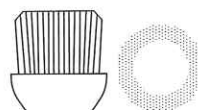

フラットリング



ペンシル

	フラット	フラットリング	ペンシル
スクリュータイプ	○		○
CAタイプ	○	○	○

※イメージ図。現寸大ではございません。

各形状の詳細は右ページへ

3種類のブラシ形状

フラット

ブラシの細さを活かして、狭い凹み部分の清掃・研磨。







■ 包装・価格

歯面研磨清掃用 各1箱36本入

最高許容回転速度:2,000min⁻¹

再使用禁止

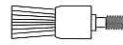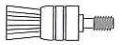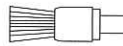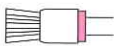	メルサーージュ (ブラシ)	メルサーージュ (ブラシ ソフト)
スクリュータイプ	 No.11 ¥3,080	 No.S11 ¥3,080
CAタイプ	 No.1 ¥3,300	 No.S1 ¥3,300

Tips! ブラシ ソフト フラットを使った症例


歯周外科処置後の清掃

ブラシ ソフトであれば、柔らかさを活かして歯頸部に入り込んだバイオフィルムや軽度の着色除去に有効です。
根面が露出した歯牙へも柔らかい毛先がやさしく当たるので痛みを少なく抑えられます。



フラットリング

リング状のブラシを活かして、広い歯面や隣接面の清掃・研磨。染色後のプラーク除去。

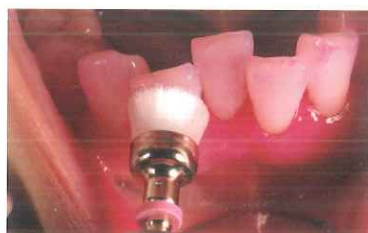


■ 包装・価格

歯面研磨清掃用 各1箱36本入

最高許容回転速度:2,000min⁻¹

再使用禁止

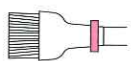	メルサーージュ (ブラシ)	メルサーージュ (ブラシ ソフト)
CAタイプ	 No.2 ¥4,950	 No.S2 ¥4,950

ペンシル

とがった先端部を活かして、小窩裂溝や叢生、歯間部などの狭い部分の清掃・研磨。







■ 包装・価格

歯面研磨清掃用 各1箱36本入

最高許容回転速度:2,000min⁻¹

再使用禁止

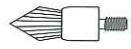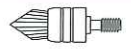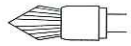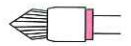	メルサーージュ (ブラシ)	メルサーージュ (ブラシ ソフト)
スクリュータイプ	 No.13 ¥3,080	 No.S13 ¥3,080
CAタイプ	 No.3 ¥3,300	 No.S3 ¥3,300

Tips! ブラシ ソフト ペンシルを使った症例

露出したセメント質

根面カリエスの予防には、フッ化物配合のペーストを根面まで届かせることが可能なペンシルタイプが有効です。
毛先の柔らかいブラシソフトであれば、やわらかい性質のセメント質にもご使用いただけます。



スクリュータイプ使用時の 回転方向について

スクリュータイプのブラシは逆(左)回転するとコントラハンドピースから外れる恐れがあります。
また、マンドレルを装着したブラシも外れる恐れがありますので、逆(左)回転のご使用はご注意ください。

PMTC用カップ スクリュータイプ/CAタイプ メルサーージュ カップ



パウダーメンテナンスが主流といわれる時代だからこそ
過剰な力をかけず、隅角も包み込めるラバーカップを

各項目(1～2)から用途に合わせてお選びいただけます

1 | 接続方法

スクリュータイプ



■ スクリュータイプのコントラハンドピースでのご使用に


CAタイプ





■ ラッチタイプのコントラアングルハンドピースでのご使用に

※イメージ図

2 | カップの形状

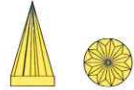	 リブ&ウェブレギュラー	 ウェブソフト	 コーン
スクリュータイプ		○	○
CAタイプ	○	○	○

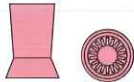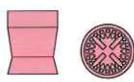	 リブソフト	 リブ&ウェブミニ
スクリュータイプ	○	○
CAタイプ	○	

リブタイプとは?

内側に一周壁のようなひだ形状があり、隣接面の使用にオススメです。カップの裾が広がりがりやすいタイプ。




ウェブタイプとは?

中の構造が十字型になった形状。切縁や隅角部などしっかり当てたい部位にオススメです。



リブ・ウェブタイプの柔らかさ比較

柔らかい		»		»		»		硬い
	リブソフト		リブ&ウェブミニ		リブ&ウェブレギュラー		ウェブソフト	

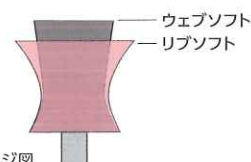


※圧縮荷重値1Nのイメージ図

各形状の詳細は右ページへ

5種類のカップ形状

リブ&ウェブレギュラー ラテックスフリータイプ

リブとウェブのどちらもが備わった形状。適度な弾力を活かして、頑固なステインを除去。

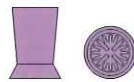

CAタイプ

■ 包装・価格

歯面研磨清掃仕上げ用 各1箱36本入
最高許容回転速度:2,000min⁻¹

再使用禁止

No.1P ¥4,950

ウェブソフト

ウェブを活かして、切縁や隅角部などしっかり当てたい部位の清掃・研磨。



スクリュータイプ

CAタイプ

■ 包装・価格

歯面研磨清掃仕上げ用 各1箱36本入
最高許容回転速度:2,000min⁻¹


再使用禁止

No.12 ¥1,980

No.2 ¥3,300

コーン

先端を押し当てることにより、隣接部の研磨やマージン部、ブラケットや矯正用バンド周辺、先端部分を活かして、歯周ポケットの清掃・研磨。

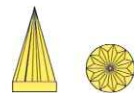

スクリュータイプ

CAタイプ

■ 包装・価格

歯面研磨清掃仕上げ用 各1箱36本入
最高許容回転速度:2,000min⁻¹


再使用禁止

No.13 ¥1,980

No.3 ¥3,300

リブソフト ラテックスフリータイプ

カップ裾の広がりやすさとリブを活かして隣接面などの清掃・研磨。

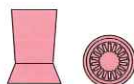

スクリュータイプ

CAタイプ

■ 包装・価格

歯面研磨清掃仕上げ用 各1箱36本入
最高許容回転速度:2,000min⁻¹

再使用禁止


No.14P ¥2,090

No.4P ¥3,960

リブ&ウェブミニ ラテックスフリータイプ

リブ&ウェブレギュラーの丈を短くしたコンパクトな形状。

小児や口腔前庭の狭い方、臼歯部頬側や舌側隅角部などにも無理なく操作可能。

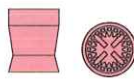

スクリュータイプ


■ 包装・価格

歯面研磨清掃仕上げ用 各1箱36本入
最高許容回転速度:2,000min⁻¹

再使用禁止

No.15P ¥2,640

リブ&ウェブレギュラーと比較すると、約20%短い形状

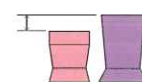

スクリュータイプ使用時の回転方向について

スクリュータイプのカップは、逆(左)回転するとコントラハンドピースから外れる恐れがあります。

また、マンドレルを装着したカップも外れる恐れがありますので、逆(左)回転のご使用はご注意ください。

PMTC用コードレスハンドピース

メルサーージュ プロ ソリッド

軽く、長時間操作でも疲れにくいコードレスタイプ

口腔内の視野が広がり、的確なPMTCをサポートします


超コンパクトヘッドで届きやすく 操作性もUP

患者さまの開口量には限度があります。
従来のヘッドよりもさらに細くて長い
超コンパクトヘッドにしました。
口腔内の視野も広がり作業効率も向上します。



ソリッド

当社従来品

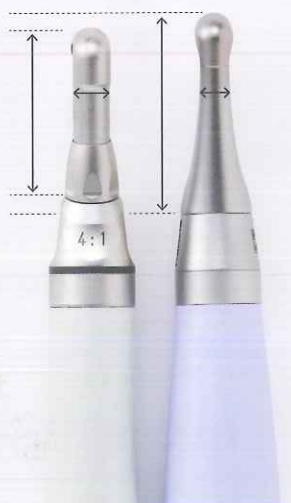

当社従来品

ソリッド

ペーストディフェンスシステム

ヘッドへのクリーニングペーストの侵入を防ぐダブルシールド防塵シールを採用。
ペースト由来のトラブルを軽減します。



ヘッドを6ポジションに簡単設定

施術部位に応じて6方向に向きを変えて取り付けることができるため、作業効率が大幅に向上します。



シンプルな操作パネル

操作ボタンはハンドピース上面に設置し、シンプルな操作が可能です。

〈広範囲な速度設定〉

ヘッドを交換することで、500min⁻¹~10,000min⁻¹と幅広く速度設定ができますので、施術目的に応じた使い方が可能です。

ギア比	回転速度 (min ⁻¹)				
1:1	2,000	4,000	6,000	8,000	10,000
4:1	500	1,000	1,500	2,000	2,500

※2,500min⁻¹以上でご利用される場合は、別売品のヘッドと等速シャングをお求めください。


正逆切換

バッテリー表示

回転速度表示部

5 2,500min⁻¹
4 2,000min⁻¹
3 1,500min⁻¹
2 1,000min⁻¹
1 500min⁻¹

電源/回転速度選択

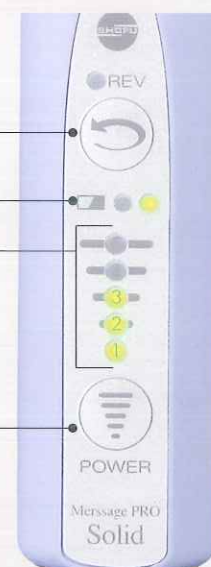

■ 包装・価格



歯科用電動式ハンドピース メルサーージュ プロ ソリッド

PMTc用コードレスハンドピース

■セット内容: ¥100,500
ハンドピース (モーターキャップ付)、
スタンド、
コントラアングルヘッド
(1/4ヘッド iFX57)、
ACアダプター、
Fタイプスプレーノズル

●仕様

ハンドピース: 定格入力DC3.7V 0.6A、最高回転速度(無負荷時) 10,000min⁻¹※1
連続使用時間(満充電時)約1時間※2、充電時間 約1.5時間
寸法 φ25×D139mm、質量 78g

※1: バッテリー残量によって回転速度が変化することがあります。
※2: 使用時の負荷によって使用時間が変化することがあります。

スタンド: 定格入力5VDC 0.6A、寸法 W80×D105×H37mm、質量120g
ACアダプター: 定格入力AC100-240V 0.4-0.2A、定格出力 5VDC 2A、
寸法 W48×D81×H43.3mm、コード長 1.8m、質量140g

コントラアングルヘッド:

許容入力回転速度10,000min⁻¹、
無負荷最高回転速度2,500min⁻¹、ギア比4:1減速、質量38g

※基本セットはスクリュータイプのみですが、別売のラッチタイプ(ヘッド・シャング)と1/4減速シャングを購入いただくとCAタイプのラバーカップ等もご使用いただけます。

■ 別売品



メルサーージュプロ
ソリッド 1/4・ヘッド
(iFX57)
¥25,800



メルサーージュプロ
ラッチタイプ・ヘッド
(NAC)
¥14,500



メルサーージュプロ
1/4減速シャング
(F4R)
¥13,500



メルサーージュプロ
ソリッド スタンド
(電源コードなし)
¥15,000



メルサーージュプロ
ソリッド ハンドピース
(モーターキャップ付)
¥46,000



メルサーージュプロ
ソリッド
バッテリーパック
¥4,900



メルサーージュプロ
ソリッド
ACアダプター
¥13,000



スクリー式ブラシ・カップ用アタッチメント

PCPマンドレル

スクリータイプのブラシ、カップをラッチタイプのコントラアングルハンドピースに取り付けて
お使いいただくことのできる全長 14mm のアタッチメントです。

■ 包装・価格



PCPマンドレル

スクリー式ブラシ・カップアタッチメント

アタッチメント 1箱12本入 ¥1,920

最高許容回転速度:2,000min⁻¹

メルサーージュブラシ・カップ、PCP マンドレルの使用上の注意事項

最高許容回転速度：2,000min⁻¹

※最高許容回転速度を超えて使用しないこと。

※メルサーージュ カップ(No.2, No.3, No.12, No.13)は、天然ゴムを使用しています。
天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある歯科医療従事者の使用および
患者への使用は禁止すること。

※本体および本材に使用している成分に対し、発疹、皮膚炎などの既往歴のある患者には
使用しないこと。

※スクリータイプのブラシおよびカップはモーターを逆(左)回転させるとハンドピース
から外れるので口腔内では必ず正(右)回転で使用するこ

■ 販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
メルサーージュ	歯科用口腔内清掃キット	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000147
PCP マンドレル	歯科用マンドレル	一般医療機器 医療機器届出番号 26B3X00014000015
メルサーージュ プロ ソリッド	歯科用電動式ハンドピース	管理医療機器 医療機器認証番号 226ABBZX00034A01 特定保守管理医療機器

■ 関連製品



クリーニングペースト
メルサーージュ プロ ワンペースト

薬用歯磨

医薬部外品

歯科医院用

販売名:メルサーージュ P ワンP

容量: 65g

香味: フレッシュシトラス

標準医院価格: ¥2,000



トリートメントペースト
メルサーージュ プロ APプラス

歯みがき類

口腔化粧品

歯科医院用

販売名:メルサーージュ APプロ

容量: 65g

香味: ユズミント

標準医院価格: ¥2,900



トリートメントペースト
メルサーージュ プロ TTプラス

薬用歯磨

医薬部外品

歯科医院用

販売名:メルサーージュ P TT

容量: 40g

香味: オレンジミント

標準医院価格: ¥1,800



歯面研磨材 一般医療機器
医療機器届出番号 26B1X00004000295

ポリッシングペースト

メルサーージュ プロ ステインオフ

容量: 40g

香味: ナチュラルミント

標準医院価格: ¥1,800



歯垢・歯石染色材
メルサーージュ PCペレット

各1瓶100個入 ¥2,420

【種類・用途】

レッド(歯垢染色用)／香味 ストロベリー

ブルー(歯垢・歯石染色用)／香味 ミント

MerSage

メルサーージュは新しい口腔衛生文化の確立により、
生活者の口腔を健やかにするとともに歯科医療の
さらなる振興を実現します。

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。
価格は2025年7月の標準医院価格(消費税抜き)です。

【販売元】

株式会社 松風

www.shofu.co.jp

- 本社:〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町11
お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く)
- 支社:東京(03)3832-4366
- 営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688
京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

取扱い店