

軟組織のレーザー治療は
この一本で完結


Diode Laser

ULTRAFAST

歯科用ペン型半導体レーザー ウルトラファスト



Forest-one

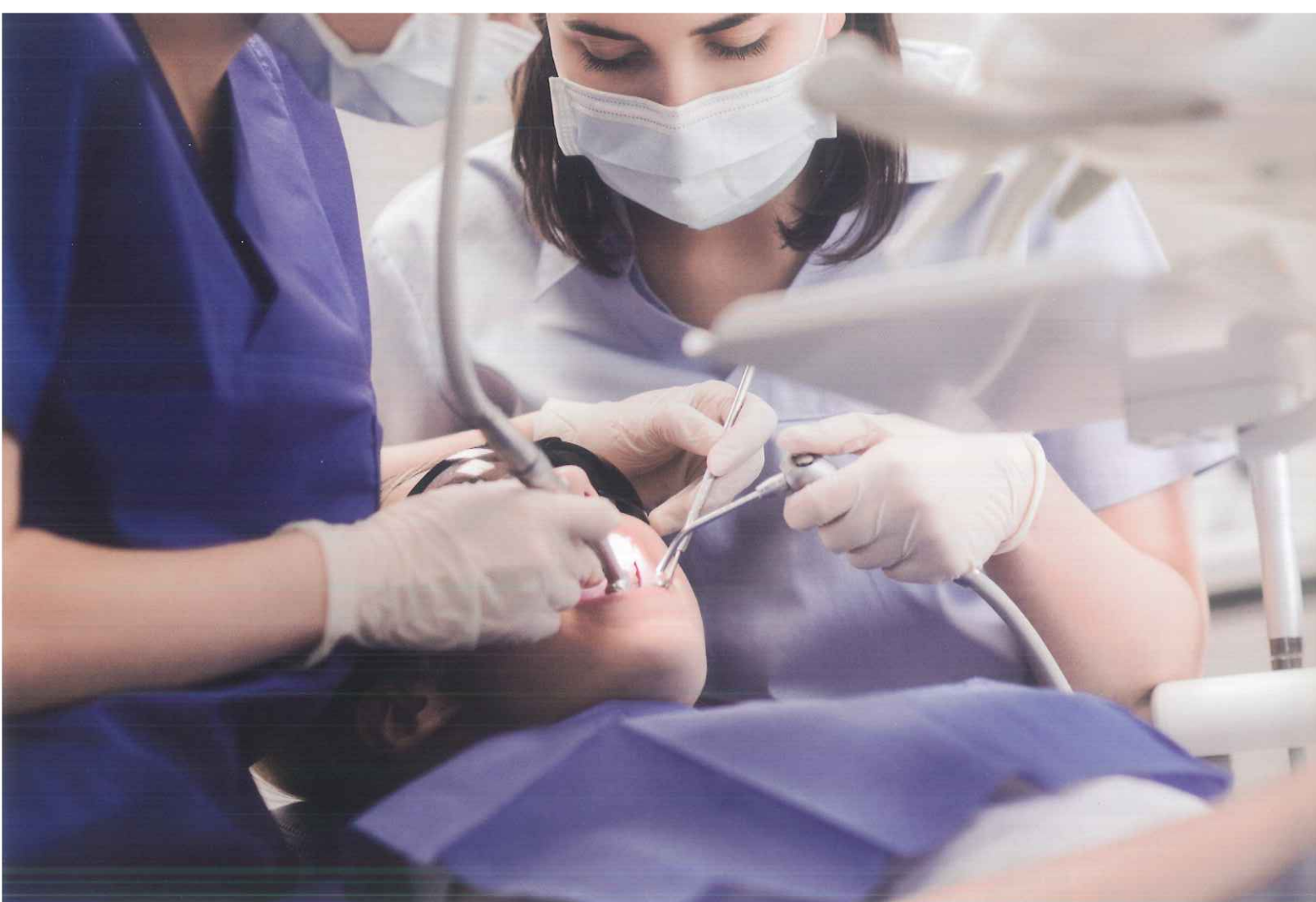

軟組織のレーザー治療は この一本で完結

小さく、汎用性が高く、高出力の
歯科用ペン型半導体レーザー

コードレス
タイプ

Size
全長:163mm
直径:22mm
重量:100g

©ファイバチップ除く

特定診療報酬算定医療機器

- 口腔粘膜処置(1口腔につき)
- レーザー機器加算1
- レーザー機器加算2
- レーザー機器加算3



FEATURES 商品特徴

01 幅広い症例に対応

VERSATILITY

半導体レーザーは、その特性を生かし、幅広い歯科治療に活用されています。CO2レーザーと比較しても遜色なく、様々な口腔内の処置に対応可能です。

効能効果

- ☒ 切開
- ☒ 止血
- ☒ 凝固
- ☒ 蒸散

臨床例

- ☒ 口内炎
- ☒ 舌小帯切除術
- ☒ 歯肉形成術
- ☒ 歯周ポケット搔爬
- ☒ 埋伏歯の露出(開窓)
- ☒ 根管治療
- ☒ 抜歯窩の止血
- ☒ インプラント手術及び周囲炎

02 高出力

HIGH POWER

最大5Wというパワフルな出力が可能です。一般的な治療では、2W程度の出力で十分な場合が多く、様々な症状に対応できます。ペン型レーザーは「低出力のため切開スピードが遅いのではないか」という従来のイメージを払拭する高出力治療も可能で、より幅広い治療選択肢を提供します。



03 コンパクト設計

SMALL SIZE

コンパクト設計で、ポケットやバッグに入れても邪魔になりません。コードレスタイプで、チェア間の移動や往診時など、シーンを選ばずに手軽に持ち運べます。軽量化も実現しており、長時間使用しても疲れにくいのも魅力です。



コードレスタイプ

全長:163mm 直径:22mm 重量:100g

構成品

ULTRAFAST



メインコントロール×1



バッテリーアセンブリ×1



チャージングスタンド×1



ACアダプタ×1



ファイバチップ(400μm)×5



レーザシールド×1



レーザゴーグル×2



バリアスリーブ×50

オプション品



ファイバチップ(400μm)×25



バリアスリーブ×100



バリアスリーブ×500



チャージングスタンド×1

商品仕様

商 品 名	ULTRAFAST	動 作 環 境	周囲温度: 10℃~26℃	バッテリー性能	
レーザの種類	半導体レーザ		相対湿度: 10%-80%(結露なきこと)	定 格 電 圧	3.7V
発 振 波 長	808nm ± 10nm		大気圧: 860hPa~1060hPa	定 格 容 量	1.4Ah
デューティ比	CW: 100% Pulse: 50%	外 形 寸 法	全長163mm×直径22mm(ファイバチップ除く)	連続使用時間	約45分(消費電力1.5W時)
電 気 的 定 格	ハンドピース: DC5V	重 量	ハンドピース: 100g	充 電 時 間	約90分
	ACアダプタ: AC100-240V 50/60Hz		チャージングスタンド: 88g	充電サイクル	約500回

※カラー・デザインは写真と異なることがあります。商品は改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

販売名: ダイオードレーザ ULTRAFAST/一般的名称: ダイオードレーザ/医療機器分類: 高度管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器/医療機器製造販売承認番号: 30600BZX00268000

■お問い合わせ先

Forest-one
www.forest-one.co.jp

株式会社フォレスト・ワン

〒274-0825 千葉県船橋市前原西2丁目19-1 津田沼ビート4階
TEL/047-474-8105 FAX/047-474-8106
MAIL/info@forest-one.co.jp

LINEからも
お問い合わせ
いただけます

