


KZR-CAD Fiber Block SHIN-BOW


保険適用 CAD/CAMブリッジ用材料

お客様のニーズにお応えし、
「シンボー」に **A1** が
加わりました。

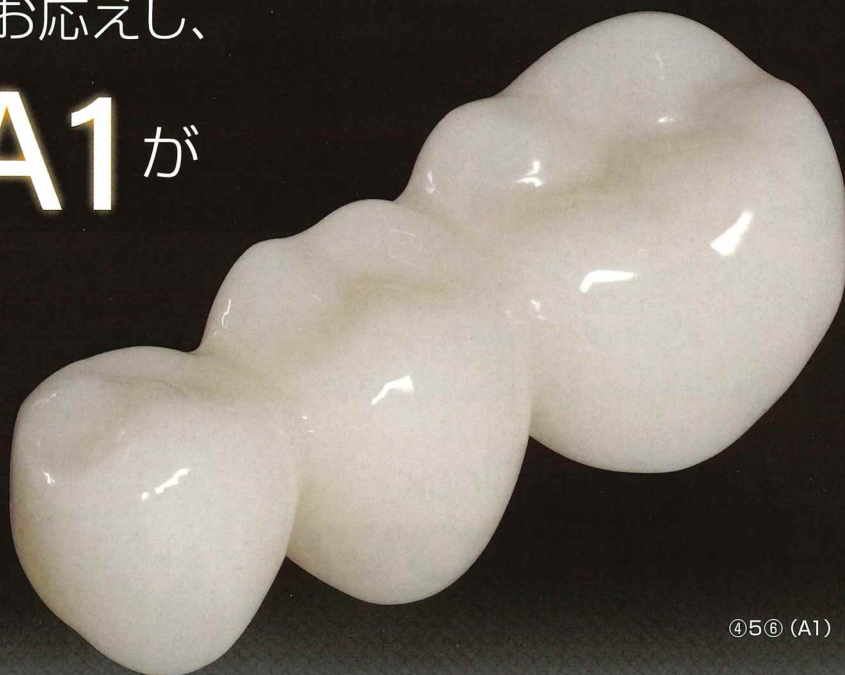

④⑤⑥ (A1)

■ 色調

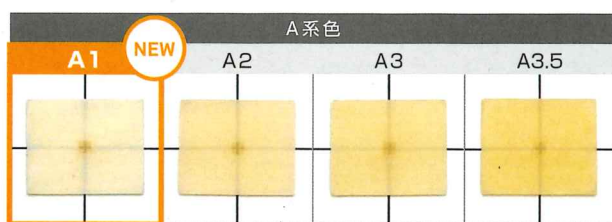

これまでの色調に A1 が加わり、ラインアップがさらに充実しました。
従来よりも幅広い色調ニーズに、「シンボー」をお使いいただけます。




「シンボー」の構造


「シンボー」は有機材料であるレジンに、無機材料であるガラス繊維を融合させることで高強度を実現したCAD/CAMブリッジ用材料です。
芯材を覆うレジン部は、大臼歯CAD/CAM冠用材料と同じ材料。そのため、審美性はもちろん、CAD/CAM冠と同じ加工性を備えています。

芯材（補強材・フレーム材）


シート状のガラス繊維を積層し、樹脂を含浸させたガラスファイバー強化レジン補強材として配置しています。

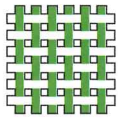

シート状の
ガラス繊維

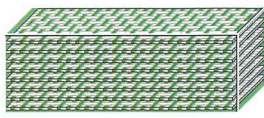

ガラスファイバー強化型レジン
「ファイバーブロック®」 商標登録 6618637

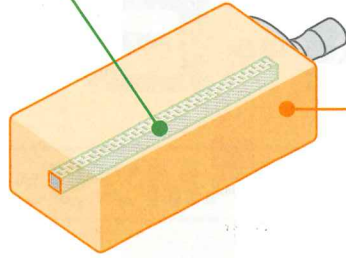

X線写真

芯材の位置がわかりやすいように
写真の色調を加工しています。




レジン材料

大臼歯用の CAD/CAM 冠用材料「KZR-CAD HR ブロック 3 ガンマシート」と同じ材料で芯材を覆っており、CAD/CAM 冠と同様の審美性・加工性を備えています。




適応症例

適応症例は第二小臼歯（5番）あるいは第一大臼歯（6番）を中間欠損とする3本ブリッジです。

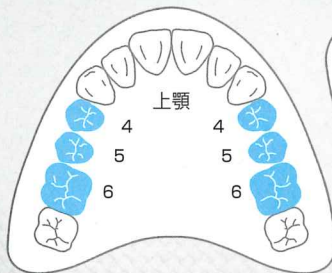

上下顎5番欠損の3本ブリッジ (④ ⑤ ⑥)

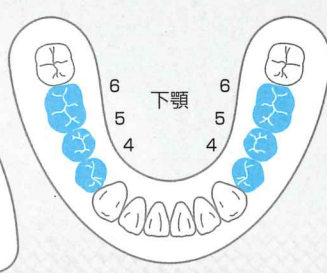

上下顎6番欠損の3本ブリッジ (⑤ ⑥ ⑦)

KZR-CAD Fiber Block SHIN-BOW

KZR-CAD ファイバーブロック シンボー

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料
認証番号：305AKBZX00011000


詳細は
コチラから▶



■ ブロックサイズ

サイズ	a	b	c	d	e
15×19×40-2	15.5	19	40	2.0	2.0

(単位:mm)

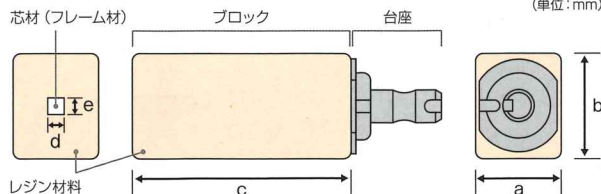

■ トレーサビリティシール



KZR-CAD ファイバーブロック シンボーを使用した場合は、トレーサビリティ（追跡可能性）の確保のため、付属しているトレーサビリティシールを診療録に貼付してください。

色調	3個入り	1個入り
A1, A2, A3, A3.5	32,000円	11,000円

KZR-CAD HR ブロック 3 ガンマシート
管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料 認証番号：303AKBZX00111000

製品や機型、パッケージなどの色は、印刷インクや撮影条件などから、実際の色とは異なって見えることがあります。記載のデータは条件によって異なる場合があります。製品の仕様、外観や容器などは予告なく変更する場合があります。価格は希望ユーザー価格（税抜き）です。製品を使用するときは必ず最新の電子添文をご確認ください。

製造販売元 **YAMAKIN株式会社**
〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3
大 阪・東 京・名 古 屋・福 岡・仙 台・高 知
生体科学安全研究室・YAMAKINデジタル研究開発室
<https://www.yamakin-gold.co.jp>

テクニカルサポート (平日 9:00~17:00) サンキュー ヨククク
製品に関するお問い合わせ 0120-39-4929

LINE公式アカウント
友だち募集中

アカウントをご登録
いただくと最新の
歯科情報、キャン
ペーンなどについ
てお届けします!



お取扱店