SHOFU アイスペシャルC-Ⅵ

軽くてカンタン、
だから誰でも撮影しやすい



EyeSpecial C-Ⅵ

ボタンレス＆大画面で操作性が向上！
USB-Cケーブルでのデータ転送が可能に！



デモの
ご依頼はこちら

2分で分かる!
プロモーションムービー
公開中!

SHOFU INC.



どこで撮っても誰が撮っても

一定の品質・構図で撮影が可能に

記録画像を撮影したいけど、毎回同じ構図で撮影するのは難しい…
「アイスペシャルC-VI」は、そんな方におすすめのデジタルカメラです。
どこで撮っても誰が撮っても、一定の品質・構図の画像が撮影できるよう
「誰でも撮影しやすい」をコンセプトに開発しました。

アイスペシャルC-VIの新機能

NEW FEATURE Point 1

ボタンレスで大画面

操作ボタンをなくし、より大きい画面で
確認できるようになりました。




NEW FEATURE Point 2

タッチ操作の充実

マルチタップ対応で、タップ以外にも、
ピンチイン/アウト、フリック、スワイプが
可能になりました。グローブをしたまま
使えます。

〈 使用例（一部）〉
再生モード画面の拡大 / 縮小
再生モード画面の送り / 戻し

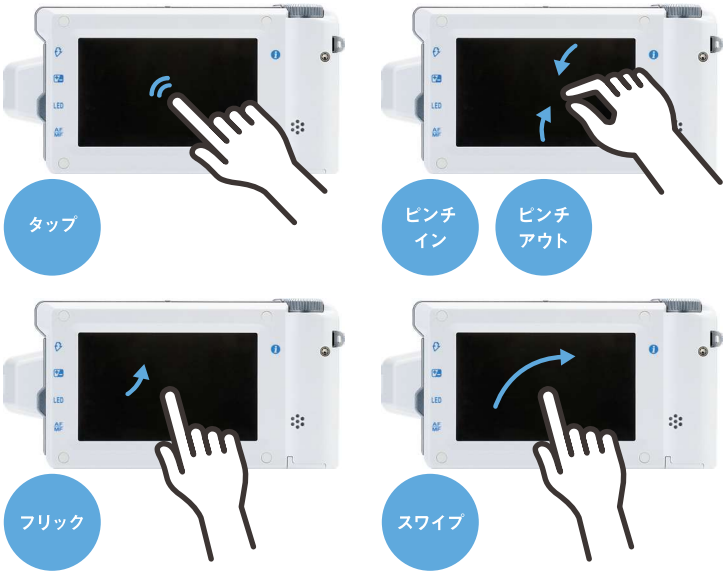

NEW FEATURE Point 3

USB-Cケーブル接続で
簡単データ取り込み

USB-Cケーブルを用いて、アイスペシャル
からデバイス（PC、タブレットなど）へデータ
取り込みが可能に。SDカードの抜き差しが
不要になりました。SDカードの紛失・破損防
止につながります。

※USB-Cケーブルは本体に同梱しておりません。
　データ通信用USBケーブル（市販）をお買い求めください。
※従来機種どおり、SDカードを使用したデータ転送も可能です。





— Point 1 —

誰でもカンタン

誰でもできるカンタン撮影

シンプルな撮影方法なので、誰でもカンタンに撮影できます。

1 モードを選択する

2 倍率を選択する

ダイヤルをまわして選択



3 撮影距離を合わせる





被写体とカメラ間の推奨距離が表示されます。

4 撮影する



手振れしにくい

※一部のモード、設定を除く

シャッタースピードが速いため、手振れしにくい設計です。



回転中の扇風機を撮影



羽が止まって見えます

歯列のピント合わせがカンタン

被写界深度が深いためピントの合う範囲が広く、
奥行きのある構図でも鮮明な画像が撮影できます。

どちらもピントが合っています▶



シーンに合わせた撮影が可能

ホワイトニングやミラー、シェードテイキングなどシーンに最適な撮影モードを選択できます。



動画撮影も可能。
記録のほかスタッフ教育ツールとしてもご活用いただけます。



一般的な口腔内の撮影に



ミラーを使っての撮影時に



ホワイトニング前後の比較撮影に







シェードテイキングに




顔貌・胸像、全身の撮影に

— Point 2 —

同じ構図 & 明るさ


一定の構図倍率が得られるオートトリミング機能

撮影倍率を選択し、推奨距離におおよそ合わせれば撮影距離が多少前後しても同じサイズの写真を撮影することが可能です。

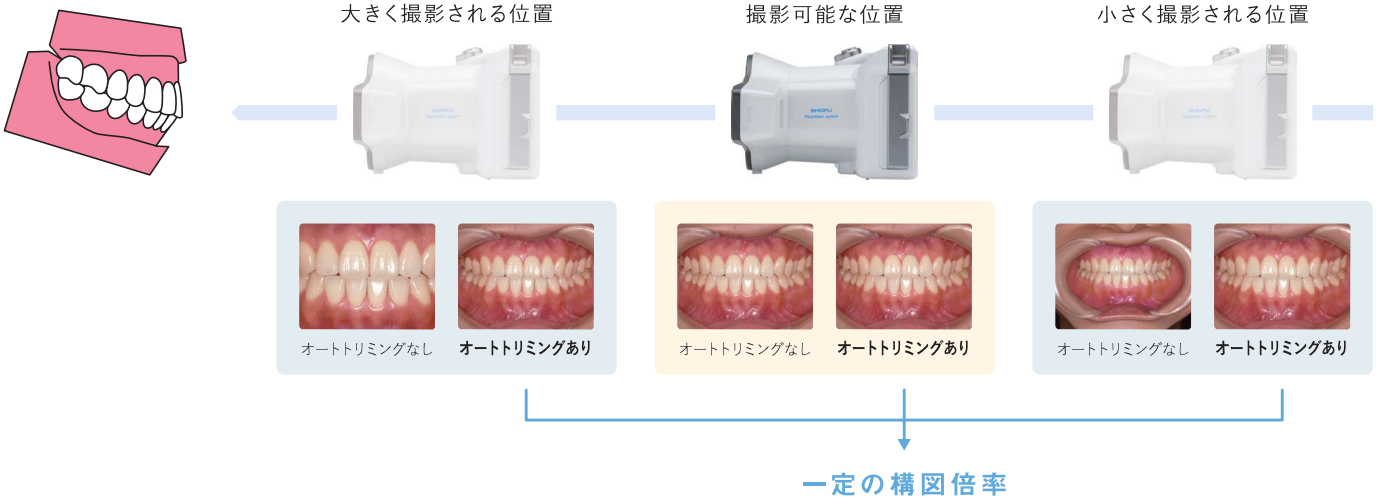

構図を決めやすい


構図を決める際の
目安となる照準を搭載

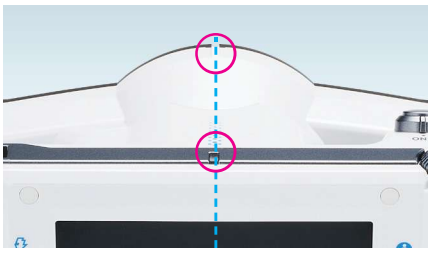

被写体に対してカメラを簡単にまっすぐ向けることができます。

別売の松風オリジナルミラー&
口角鈎でさらに使いやすく



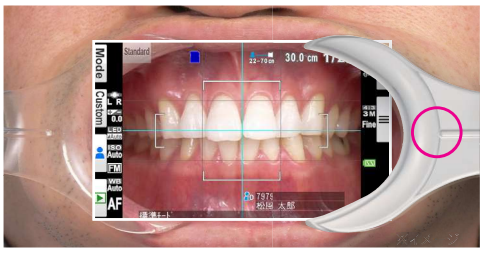

ガイドラインを付与した松風オリジナルのミラー・口角鈎をお使いいただくことで簡単・正確に撮影が可能です。ガイドラインを液晶画面のグリッドラインと合わせることで正中・平行性の確認ができるため、構図のズレ防止に繋がります。

一定の明るさが得られるフラッシュマチック（FM）調光

撮影距離に応じてフラッシュ光量を自動で調整するFM調光機能を搭載。
被写体との距離の変化、背景の明るさの違い、デンタルライトの有無にかかわらず、被写体を常に一定の明るさで撮影できます。



基準画像



背景を変えた画像



基準画像から遠い画像




照明ありの画像

考え抜かれたボディデザイン

各シーンに最適な照明効果が得られる内外4灯のフラッシュ

外側フラッシュ




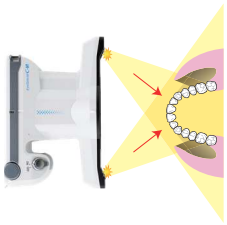

前歯の“テカリ”を抑えます

内側フラッシュ



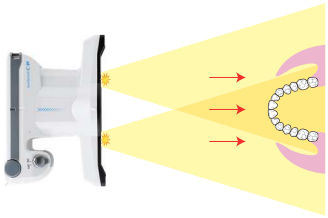

口腔内の奥まで光を届けます


※使用可能なフラッシュはモードにより異なります。

肉眼で見た状態に構図を合わせやすい

液晶画面の中心とレンズの中心(光軸)が一致しており
肉眼で見た状態と同じ構図に合わせやすくなっています。


アイスペシャルの場合

液晶とレンズの中心が一致していると肉眼で見た状態と同じ構図に合わせやすい

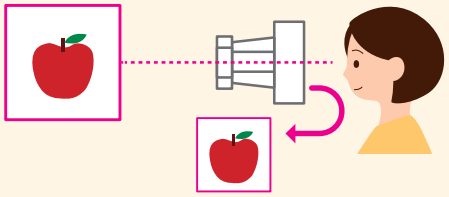

一般的な一眼レフ、スマートフォンの場合

液晶とレンズで中心が異なると肉眼で見た構図と液晶に映し出される構図にズレが生じやすい

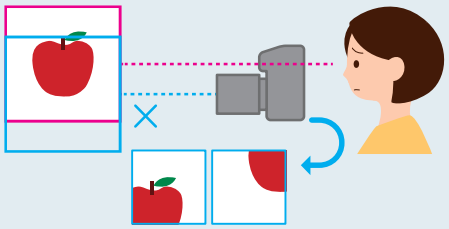

撮影モードのご紹介

STD 標準



標準モード

標準的なマクロ撮影をするとき。
歯科での使用例:口腔内・口元

Ext. range 遠距離



遠距離モード

標準モードより離れた位置から撮影したいとき。
歯科での使用例:オペ中の口腔内・口元

Mirror ミラー



ミラーモード

ミラーを使用して撮影するとき。
歯科での使用例:咬合面観・側方観のミラー撮影

動画



動画モード

動画を撮影するとき。

顔貌

NEW
上下方向検知機能



顔貌モード

顔貌や全身を撮影するとき。
歯科での使用例:顔貌・全身
カメラを構えた方向に合わせて画像の上下を自動で判別します。

Low glare 低反射



低反射モード

反射率の高い被写体や表面の反射を抑えて撮影したいとき。
歯科での使用例:前歯部・模型・技工物

Soft flash 低発光



低発光モード

半透明な被写体の表面色を強調して撮影したいとき。
歯科での使用例:ホワイトニング術前・術後の比較写真

Isolate shade シェード抽出



シェード抽出モード

色の錯覚を起こしにくい写真を撮影したいとき。
歯科での使用例:シェードテイク用写真

Tele macro テレマクロ



テレマクロモード


標準モード、低反射モードよりも撮影倍率を拡大したいとき。
歯科での使用例:前歯部・技工物・模型の拡大写真

※このモードで撮影する際は、あらかじめ付属のクローズアップレンズをカメラに取り付けてください。

その他便利機能のご紹介

ペイント

写真に文字や図形を書き込めます。

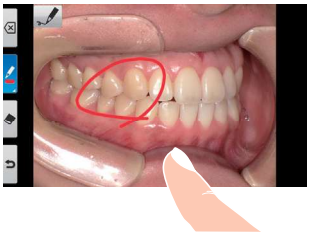

レンズキャップ保持機能

本体の側面にレンズキャップをはめ込めます。撮影時の保管場所、紛失防止の悩みを解消します。



防水機能

水滴がかかっても安心の防水機能付きです。
(IPX4準拠)



エタノール清掃可能

手軽にお手入れ可能。凹凸の少ないデザインなので、清潔にお使いいただけます。




+α

撮影画像を自動で整理できる

松風シュアファイル

松風シュアファイルをお使いのパソコンにインストールしていただき、撮影前にIDを登録しておくことで、PCに画像を取り込む際、IDごとにフォルダを振り分けて保管することが可能です。※松風シュアファイルはPCのみ対応しており、タブレットはご利用いただけません。

※松風シュアファイルがインストールされたPCは、アイスペシャル本体とSDカード、またはUSBケーブルを接続することでデータ取り込みができます。

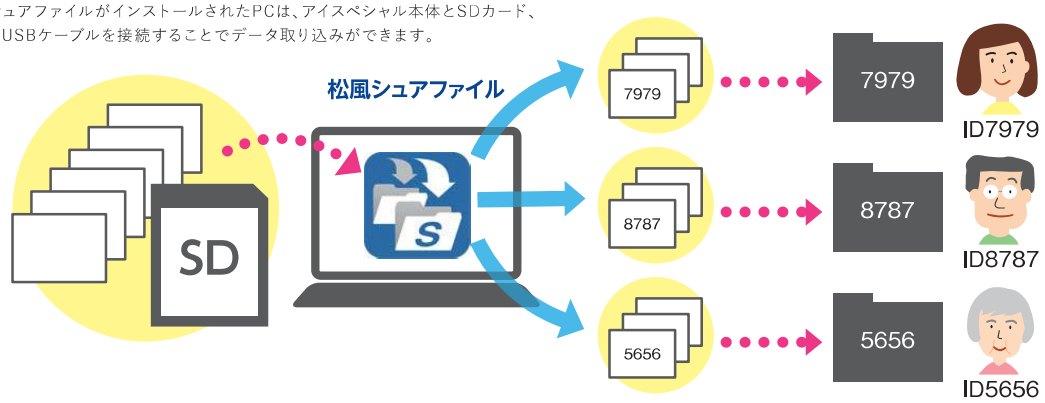

他社製ソフトウェアとの連携版もご用意しています。

連携いただくことで
次のようなメリットが得られます

- アイスペシャルで撮影した画像を自動的にお使いのソフトウェアに登録できます。
- 各ソフトウェアで生成される二次元コードを読み取るだけでIDと氏名の情報を画像に登録することができます。

連携可能なソフトウェア

- 歯撮くんPlus(株式会社アクアシステム)
- 達人プラス(株式会社ナルコーム)
- Apotool(株式会社ストランザ)
- NEOPREMIUM2(朝日レントゲン工業株式会社)
- Dental X(株式会社プラネット)
- actionGATE(株式会社ヨシダ)
- TrinityCore(株式会社モリタ)
- ジニー(株式会社DentaLight)
- VisualMax Ⅲ(メディア株式会社)
- picmoR(株式会社Passione)
- MyGate(タカラベルモント株式会社)

※2026年11月現在の情報です。※別途二次元コード生成用ソフトウェアが必要なソフトウェアもございます。※連携設定については、各メーカーにお問い合わせください。各連携ソフトウェアの設定は有料となる可能性もございます。

包装・価格



アイスペシャル C-VI　1台

【内容】カメラ本体 1、クローズアップレンズ 1、グレーカード 1、SDHCカード（16GB）1、レンズキャップ 1、ストラップ 1、単3アルカリ乾電池 4

別売品



交差偏光フィルター
松風クロスポラライザー
1個



ワンタッチで簡単に取り付け・取り外しが可能です。

ご注意

アイスペシャルC-Ⅳ（4）より前の機種ではお使いいただけません。



歯 鏡

松風 口腔内撮影キット
5枚法用

【キット内容】口腔内撮影用ミラー 咬合面観用・口角鉤 A（2入）・C（2入）・P


仕様など詳細は
こちらをチェック

正確なシェードテイキングのために…
ガミーとの併用がおススメ!


ガミーは歯肉色のシェードガイドホルダーです。
シェードテイキング時、患者さまの歯肉に合わせた色調のガミーを使用することで、目の錯覚を防止し、より正確なシェードテイキングが可能です。



松風ガミーV
1セット4個入り

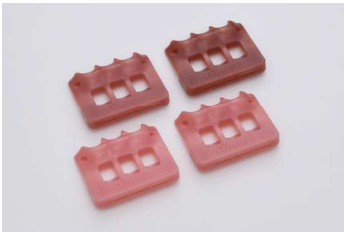

ヴィンテージ ガミー
1セット4個入り

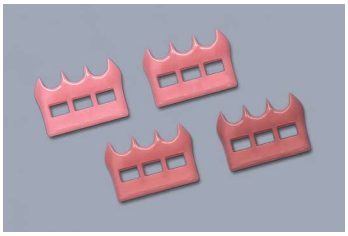

〈 4種類の色調をご用意 〉

さまざまな症例に対応できるよう、段階的に濃度を上げた4種類をご用意しています。

※ヴィンテージガミーは、「NCCシェードガイド」のみに適応しています。

歯周病患者画像活用指導料について

歯周病患者画像活用指導料
（口腔内写真の撮影、指導）　**50点**

●対象患者／歯科疾患管理料、周術期等口腔機能管理料Ⅰ～Ⅲ、歯科特定疾患療養管理料、歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料のいずれかの管理料を算定していること。
●算定要件／歯周病に罹患している患者に歯周病検査を実施する場合において、継続的な管理を行うに際して必要な口腔内写真を撮影し、患者またはその家族に療養上必要な指導を行った場合に算定する。撮影した口腔内カラー写真は、診療録に添付するか、デジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理する。

歯冠補綴時色調採得検査について

歯冠補綴歯1歯につき
（12枚を上限とする）　**10点**

●算定条件／前歯部に対し、レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、CAD/CAM冠または硬質レジンジャケット冠を製作する場合において、硬質レジン部の色調を決定することを目的として色調見本とともに当該歯冠補綴を行う部位の口腔内写真を撮影した場合に算定する。

※その他の詳しい内容等は厚生労働省または各都道府県の各歯科医師会等にお問い合わせください。

アイスペシャルC-Ⅵ特設サイト
www.shofu.co.jp/pickup/eyespecialc6/
※こちらのwebページは2026年10月29日公開予定です。

ご使用の際は取扱説明書等をよく読んでお使いください。

※このカタログに記載されている二次元コードはアイスペシャルでは読み取れません。スマートフォン等を使って読み取ってください。

取扱い店

噛む、笑う、生きる、を支える。
株式会社 松風
本社／〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町11　お客様サポート窓口 TEL:075-778-5482 受付時間8:30～12:00 12:45～17:00（土日祝除く）
支社・営業所／東京 TEL:03-3832-4366　営業所／札幌 TEL:011-232-1114　仙台 TEL:022-713-9301　名古屋 TEL:052-709-7688
京都 TEL:075-757-6968　大阪 TEL:06-6330-4182　福岡 TEL:092-472-7595
www.shofu.co.jp