SD AUTO CLEAN

オートクレーブ内のメンテナンスフリー洗浄液!!

AUTO CLEAN DISPO

頑固な汚れが蓄積した オートクレーブ内を強力洗浄!!


3ヶ月に1回、オートクリーンディスポを使用することにより
チャンバー内の酸化被膜や金属焼けを簡単に除去します。

強力洗浄



500mL　1,200mL
〈SDオートクリーン ディスポ〉


ご使用方法

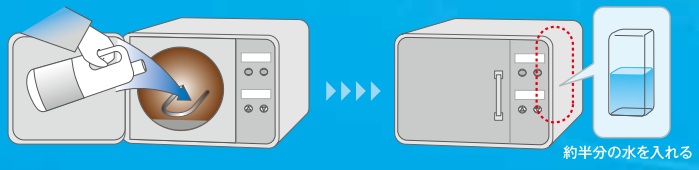

〔1〕SDオートクリーンディスポを直接チャンバー内の水量センサーにかかるまで入れます。

約半分の水を入れる

〔2〕貯水タンクに通常の約半分の水を入れた状態でオートクレーブを作動してください。（約20分）※乾燥工程は省略してください。

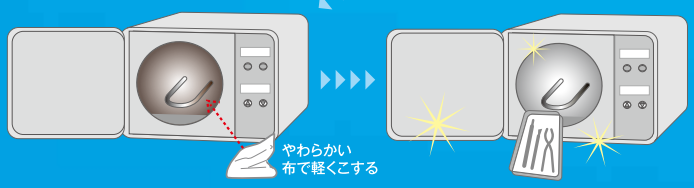

〔3〕終了後、汚れのひどいところは柔らかい布などで軽く擦ってください。
※チャンバー内は非常に熱くなっているのでご注意ください。

〔4〕作業完了後、貯水タンクの水をすべて捨て※、その後、SDオートクリーンを入れ通常の滅菌作業を行ってください。
※貯水タンク内に汚れが溜まるため、再度水をタンク内にためて、排水してください。

〈SDオートクリーン ディスポ〉
医院価格：500mL **2,000**円（税別）／1,200mL **3,900**円（税別）
成　　分：酒石酸・pH調整剤

AUTO CLEAN


チャンバー内の洗浄と 滅菌する器具の防錆洗浄!!

通常、オートクレーブ滅菌に使う水道水又は
精製水の代わりに使用することでチャンバー内の
硬度成分（カルシウム、マグネシウム）等の付着を解消します。

洗浄
消臭
防錆




〈SDオートクリーン 5L〉

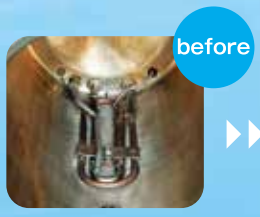



SDオート
クリーンに
切り替え30日後

ご使用方法

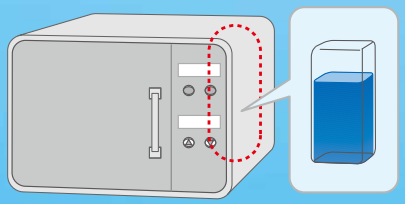

●オートクレーブ内の液体をすべて排水し、SDオートクリーンを薄めずに貯水タンクに適量入れてください。
●貯水タンク内液量が減った場合はSDオートクリーンを補充してください。
●1ヶ月に1回、貯水タンク内の液を抜き、新たにSDオートクリーンを入れてください。

○天然成分タンニンが持つ脱酸素力が防錆力を発揮します。
○オートクレーブ内の臭い、汚れの蓄積を防ぎます。
○高性能分散剤の効果で、硬度成分・シリカ・鉄分による湯垢などの付着を防止します。

〈SDオートクリーン 5L〉
医院価格：**4,300**円（税別）
成　　分：天然高分子タンニン・分散剤・pH調整剤

SD サンデンタル株式会社
〈本　　社〉〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目8番9号　Tel.06-6245-0950 Fax.06-6245-7690
〈東京営業所〉〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番3号　Tel.03-3836-9347 Fax.03-3836-2090
〈福岡営業所〉〒812-0008 福岡市博多区東光1丁目3番8号　Tel.092-482-2318 Fax.092-482-2339
http://www.sundental.jp

■本製品のお買い求め・ご相談は

2406603