# 軟性樹脂の

を、こと削ります

切れない... 目詰まり... 巻き込み...





コメット マッハバー

GSQ



製品動画は

適応素材

シリコーン系軟質リライニング材

アクリル系軟質リライニング材

ティッシュコンディショナー

マウスガード


トゥースポジショナー

テンポラリークラウン



写真ご提供: 奥野幾久先生(奥野歯科医院、大阪市)



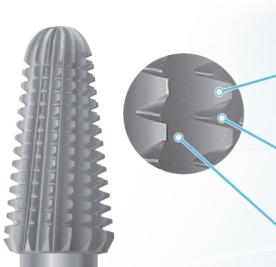

## ▶ 多数のブレード

効率的に多量の材料を切削することができます。

#### ▶ 鋭いクロスカット

被切削面も滑らかで、表面がささくれません。

## ▶深い溝

目詰まりを防ぎます。

# ▶カラーコード化

ブラック&グリーンリングで簡単識別。









H79GSQ-070

7.0 mm

14.0 mm



H251GSQ-060

6.0 mm

14.0 mm



H257GSQ-023

2.3 mm

13.0mm





品番 最大径 作業長 適正回転数/分

9.0 mm 15,000rpm

黒&緑ライン

H77GSQ-040

4.0 mm

スプリント、マウスガード、シリコーン系軟質裏装材、アクリル系軟質裏装材、ティッシュコンディショナー、テンポラリークラウン

2.3 mm 13.0mm

H261GSQ-023

H351GSQ-060 6.0 mm 1 1.0 mm

標準医院価格(1本入)

5,800円 5,800円 5,800円

H79GSQ-040

4. 0 mm

13.0 mm

5,800円

4,300円

4,300円

5,800円 ※製品形状はほぼ実物大です

使用上のお願い

適用材料 カラーコード

・ 手前に向かって引き寄せるようにしてご使用下さい。 (逆向きで使用されると、切削力が落ちる場合がございます)
・ 作業部の発熱にお気を付け下さい。 (切削力を高めるため、切削中に作業部が発熱するよう設計しております)

医療機器の分類:一般医療機器 一般的名称:歯科技工用カーバイ切削器具販売名:コメットカーバイドカッター承認番号:27B2X00091000004

株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL 06-6773-3333 代

東京営業所〒110-0016東京都台東区台東2-24-2 TEL 03-3835-2653代

九州営業所 〒812-0893福岡市博多区那珂 6-24-21 URL:http://www.momose-dm.co.jp/ TEL 092-575-6060 代

お問い合わせは